

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## сауны для лица БЕТРО

Сауна для лица "Бетро" - бытовой косметический прибор, предназначенный для проведения процедур по очистке и оздоровлению кожи лица и шеи, а так же проведения ингаляций на основе целебных трав для укрепления здоровья и профилактики простудных заболеваний.

### Описание.

1. Колпак.
2. Насадка для ингаляции.
3. Крышка для рассеивания потока пара.
4. Ванночка.
5. Корпус.
6. Выключатель.
7. Мензурка.
8. Шнур соединительный.

### Важные меры безопасности.


- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надёжное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны.
- Не кладите и не храните прибор там, откуда он может упасть в ванну или раковину.
- Не помещайте и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь сразу достать прибор, если он упал в воду. Сначала отключите его от сети. Сделайте это немедленно.
- Никогда не помещайте прибор на мягкую поверхность, например на кровать или диван. Всегда ставьте прибор на твёрдую ровную поверхность.
- Никогда не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии дремоты.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не держите лицо близко к испарителю, так как Вы можете получить ожог горячим паром.
- Не пользуйтесь прибором, если на лице имеются открытые раны.
- Не пользуйтесь прибором после любого рода хирургических операций на горле или лице, включая стоматологические с использованием местных анестезирующих средств.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если: у вас температура, или какие-либо воспалительные процессы, боли или Вы находитесь под присмотром врача или принимаете лекарства.
- Во избежание попадания в лицо горячих брызг кипящей воды не пользуйтесь прибором без крышки рассеивателя пара (рис. 1, поз. 3).
- Находитесь рядом с детьми, принимающими паровую ингаляцию.
- Не включайте прибор без налитой в ванночку воды, так как это существенно сократит срок его службы.
- По завершении процедуры прибор должен быть отключен от электросети.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

### Особенности.


- Возможность регулировки насыщенности пара при ингаляциях
- Автоматическое понижение мощности при выкипании воды из ванночки прибора.
- Индикация включения в сеть.
- Возможность заваривания целебных трав непосредственно в ванночке.

### Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Налейте в ванночку одну мензурку воды (рис. 2), установите на корпус колпак (рис. 3) с крышкой для рассеивания потока пара (рис. 1 дет. 3), вставьте вилку в розетку электросети и нажмите клавишу выключателя (рис. 4). При включении под прозрачной клавишей выключателя загорится сигнальная лампочка.
- На панели рядом с клавишей знаком "1" обозначено "включено", "0" - "отключено".

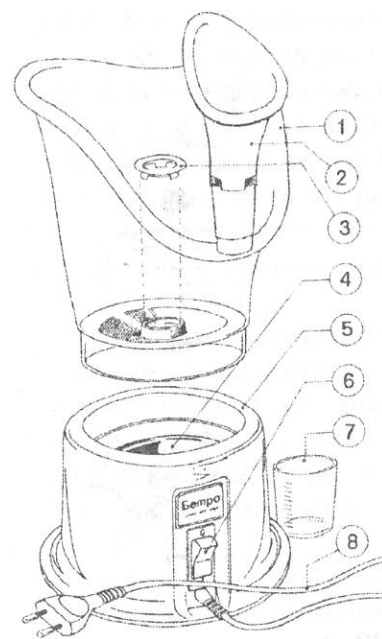


- Чтобы сохранить причёску, во время принятия процедуры уберите волосы под косынку, полотенце и т.п.
- После закипания воды опустите лицо в колпак (рис.5). При этом найдите оптимальное положение, чтобы температура пара была для Вас приемлемой.
- По окончании процедуры отключите прибор и выньте вилку из розетки электросети.

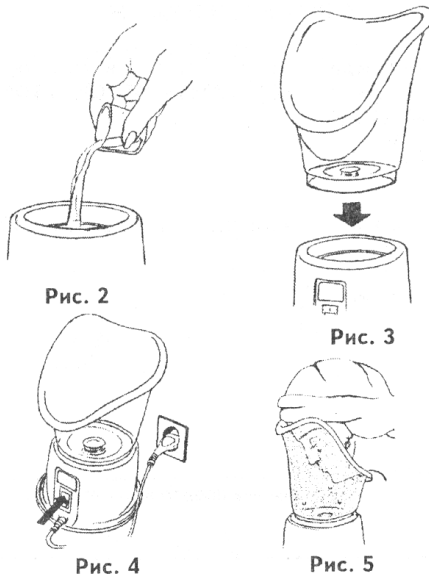

### Эксплуатация.

- Для ингаляционной процедуры налейте в ванночку 1-2 мензурки воды или приготовленного отвара лекарственных трав.
- Установите на корпус колпак (рис. 3), снимите крышку (рис.1 поз.3) и вместо неё в отверстие вставьте насадку для ингаляции (рис. 1, поз. 2).
- Насадка состоит из двух частей - воронки и втулки (рис. 6а).
- Соедините их, как показано на (рис.6 б), вставив втулку в воронку до упора.
- На боковой поверхности насадки имеется три окна. Поворачивая воронку относительно втулки в любую сторону (рис. 6в), окна могут быть открыты, частично открыты или закрыты полностью. Это важное обстоятельство прямо влияет на температуру пара, т.е. при открытых окнах пар "менее горячий" и наоборот.
- Теперь включите прибор и, после закипания воды, вдыхайте пар носом или ртом (рис.7).
- Дышите плавно, не спеша, т.к. резкий вдох или выдох провоцирует выброс большой порции пара, а это приводит к неприятному ощущению - жжению.
- По окончании процедуры отключите прибор выключателем и выньте вилку из розетки электросети.

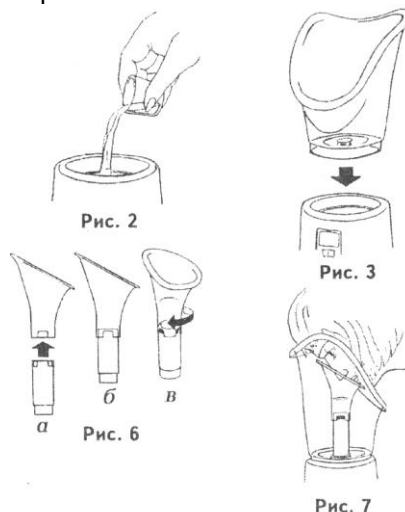

### Очистка и уход.

- Чтобы прибор служил долго и исправно следует соблюдать простые правила пользования и ухода.
- После очередной процедуры снимите колпак, слейте из ванночки остаток воды, выньте из колпака насадку РПА, отсоедините седло, если была использована ингаляционная насадка, разделите её на две части.
- Все детали промойте и высушите.
- Корпус прибора, после остывания ванночки, протрите влажной хорошо отжатой салфеткой.
- Если прибором пользовался больной, детали прибора нужно подвергнуть дезинфекции. Для этого протрите их салфеткой, смоченной в растворе, приготовленном из расчёта 10-15 мл. 3% перекиси водорода и чайной ложки моющего средства (стиральный порошок) на пол-литра воды.
- Раствор с деталей смойте чистой водой.
- С корпуса остатки раствора удалить, смоченной в чистой воде и отжатой салфеткой, повторив операцию 2-3 раза.

**Хранение.**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.
- Храните набор в безопасном, сухом месте.

**Технические характеристики.**

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 120Вт

Емкость ванночки: 0,075л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*