



Ирригатор для полости рта

WATERPIK WP-70E2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

WATERPIK WP-70E2

Ирригатор для полости рта WaterPik WP-70E2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В
Давление воды - 220 - 620 кПа
1200 импульсов в минуту.



ИМ05

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Когда Вы используете электрические приборы, особенно если до прибора могут добраться дети, необходимо следовать основным мерам предосторожности.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Всегда отключайте прибор от сети после использования
- Не трогайте электрический шнур влажными руками.
- Не оставляйте прибор там, откуда он может упасть и попасть в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванн.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не трогайте прибор, если он упал в воду. В этом случае, выключите его из сети немедленно.

ВНИМАНИЕ:


Чтобы снизить риск ожогов, электрического шока, возгорания, серьезных повреждений мягких тканей полости рта:


- Не используйте прибор, если у него поврежден провод или вилка, если он не работает должным образом, если он падал, был поврежден или погружался в любую жидкость. Свяжитесь с представителями WaterPik Technologies.
- Проинструктируйте и присматривайте за детьми и людьми с ограниченными возможностями, чтобы они пользовались прибором правильно.

- Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите инструкцию по применению для правильного использования прибора.
- Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в инструкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы WaterPik Technologies.
- Не отделяйте эластичную насадку Pik Pocket от прозрачной части насадки. Если она отделилась по какой-то причине, выбросьте обе части насадки и впоследствии пользуйтесь новой насадкой Pik Pocket.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится.
- Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.
- Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.
- Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте, если у Вас в полости рта есть ювелирные украшения. Извлеките их перед применением.
- Не используйте прибор, если у Вас открытая рана на языке.
- Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед процедурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Вашего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого другого устройства для гигиены полости рта.


СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

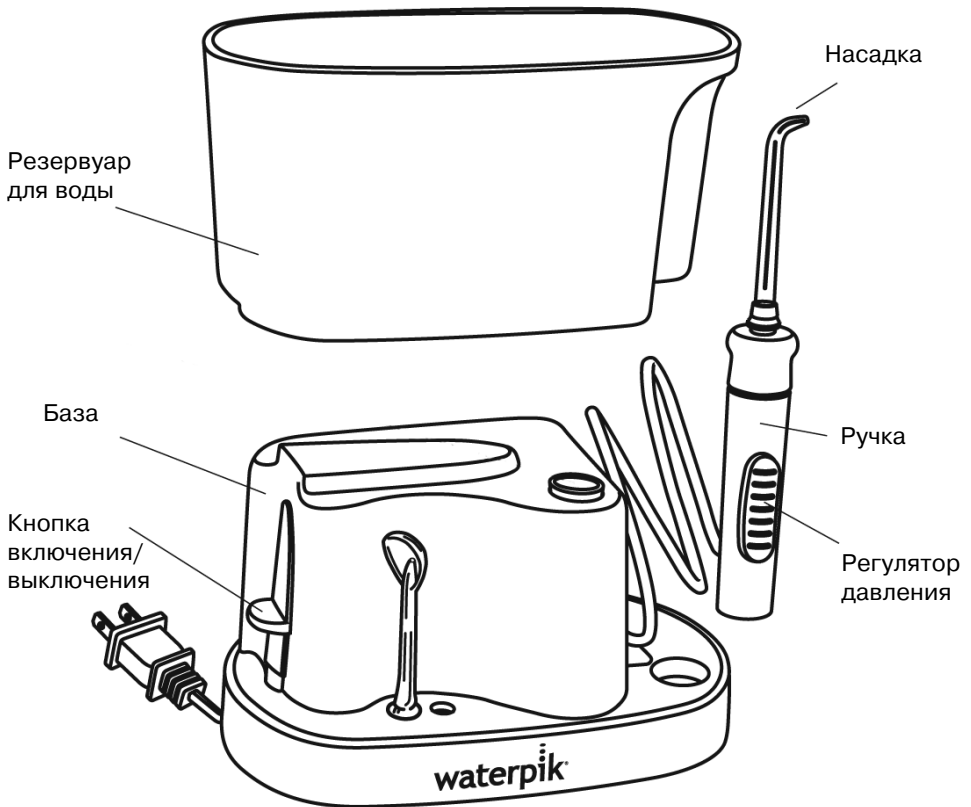


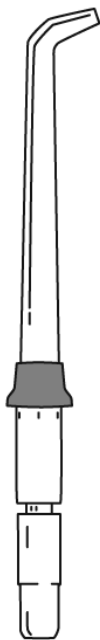

Стандартная
Насадка

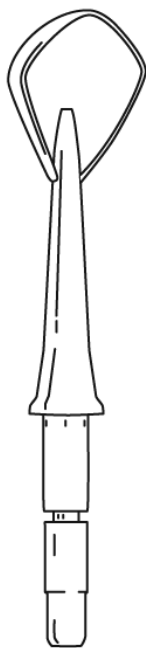

Насадка для
чистки языка

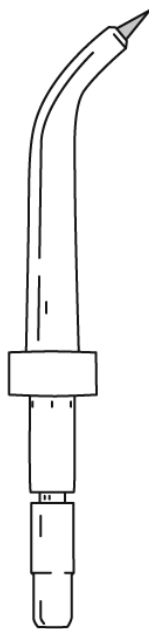

Насадка Pik Pocket
(для чистки десневых
карманов, **не входит
в комплектацию
прибора**)

ПЕРВЫЕ ШАГИ



Подключите прибор к электрической сети. Если розетка имеет выключатель, убедитесь что розетка включена.

Подготовка резервуара.

Снимите резервуар с базы. Заполните резервуар теплой водой. Расположите резервуар в базе приложив небольшое равномерное усилие сверху.

Установка и снятие сменных насадок.

Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к ручке, если насадка установлена правильно. Для извлечения насадки нажмите на верхнюю часть ручки по направлению к шлангу и потяните насадку на себя из ручки ирригатора.


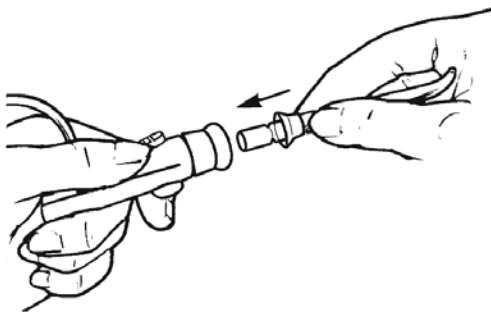
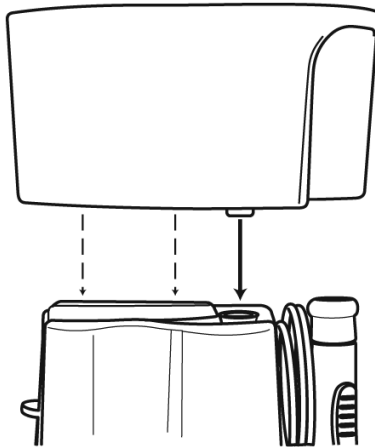


Выбор уровня давления воды.

Установите переключатель давления на ручке ирригатора на нижний уровень. Постепенно увеличивайте давление до необходимого вам уровня, который вы выберете сами или вам подскажет ваш стоматолог.

Расположение во рту.



Расположите насадку в ротовой полости. Направьте кончик насадки на зубы. Свободной рукой включите прибор. Установите давление воды на нужный Вам уровень.

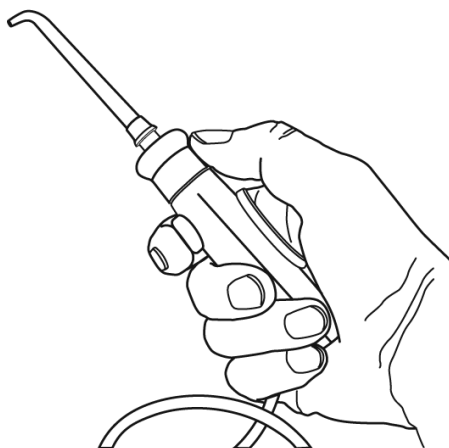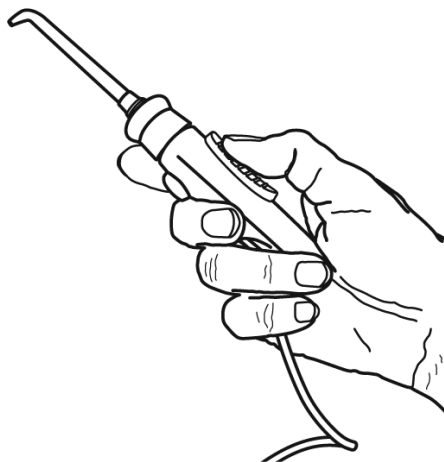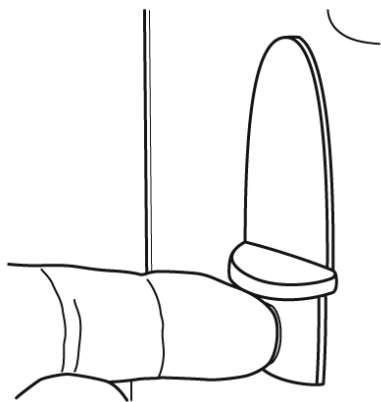

Рекомендованная техника.

Направляйте струю воды под углом 90 градусов к линии десны. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания воды, но не закрывайте рот, давая воде свободно вытекать наружу.

Для лучших результатов начинайте с боковых, дальних зубов, двигаясь к передним зубам. Перемещайте насадку от зуба к зубу, делая паузы между зубами. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг зубов и между зубами не станут чистыми.

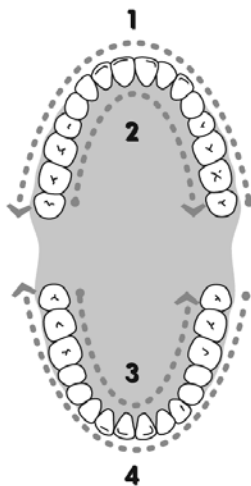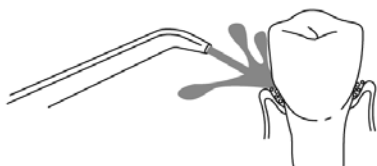

Пауза.

Вы можете на время прекратить подачу воды нажатием кнопки паузы на ручке.

После завершения чистки.



Выключите прибор. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара. Отключите прибор от сети.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ


Насадка Pik Pocket.

Насадка Pik Pocket позволяет подавать воду или антибактериальный раствор непосредственно в периодонтальные карманы. Для этого расположите мягкий кончик насадки напротив зуба под углом в 45 градусов и аккуратно заведите насадку под линию десны, в карман. Включите прибор при минимальном уровне давления воды и производите чистку, продвигая насадку между зубами и вдоль линии десны. Продолжайте чистку до тех пор, пока резервуар не опустеет.

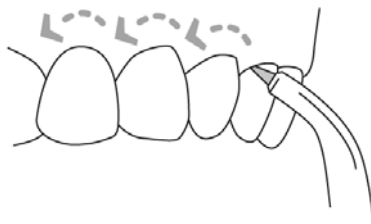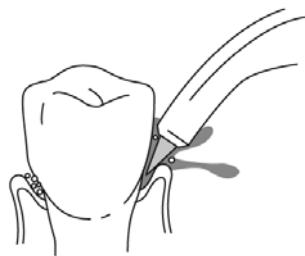

Насадка для чистки языка.

Расположите насадку на языке, включите ирригатор при минимальном уровне давления воды и увеличивайте уровень давления до комфортной для Вас степени. Аккуратно расположите насадку на центр языка и, прилагая небольшое усилие, тяните насадку вдоль языка.

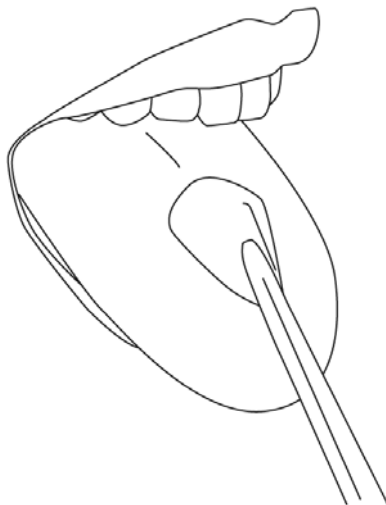

Использование растворов и ополаскивателей.

WaterPik можно использовать с ополаскивателями и антибактериальными растворами. Спросите Вашего стоматолога о растворах, которые Вы сможете использовать.

Важно: использование антибактериальных растворов может сократить срок службы ирригатора WaterPik.

Если у Вас есть вопрос по использованию того или иного раствора в ирригаторе WaterPik, Вы можете задать его службе поддержки WaterPik Technologies. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится. После использования раствора необходимо прополоскать и промыть прибор. Частично наполните резервуар теплой водой. Направьте насадку в раковину, включите прибор и держите его включенным до полного опустошения резервуара. Это поможет продлить срок службы прибора и поддерживать чистоту прибора и насадок.

УХОД ЗА ИРРИГАТОРОМ WATERPIK

Протирайте прибор сухой тканью или мягким неабразивным очистительным средством. Резервуар можно мыть мыльной водой и на верхних полках посудомоечной машины.

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

Перед помещением прибора в место с отрицательной температурой, полностью опустошите резервуар и прибор от воды.

Сервисное обслуживание

WaterPik не имеет частей, которые бы требовали сервисного обслуживания. Ремонт этого прибора должен осуществляться только в сервисном центре WaterPik Technologies. Официальный дистрибьютор в России — ЗАО "Арком". (812)327 0353. E-mail:arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор полностью исправен и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользователю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки,

и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по гарантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не был физически поврежден потребителем и работал только с насадками и аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купить дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представителей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас посетить наш сайт — www.arkom-org.com

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Действия по устранению неисправности
Насадки и насадка для чистки языка Протечки между насадкой и поворотным механизмом насадки	Насадка установлена неправильно	Снимите насадку и установите снова
Насадка Pik Pocket Течь мягкого кончика	Кончик порван	Замените насадку
База прибора Течет шланг к ручке	Поврежден шланг	Может быть заменен в авторизованном центре WaterPik, или Вы можете запросить ремонтный комплект для самостоятельного устранения неисправности
Течет резервуар	Резервуар неправильно расположен на базе или клапан резервуара перевернут	Заменить клапан резервуара (Позвоните в сервисный центр WaterPik Technologies). Переверните клапан
Плохое давление/ не идет вода	Резервуар неправильно расположен на базе	Переустановите резервуар. Приложите небольшое равномерное усилие сверху на резервуар.
Прибор не включается	Мотор не работает	Убедитесь, что в сети есть ток. Для этого подключите к сети другое электрическое устройство и включите его.



Негосударственное
образовательное учреждение
(повышения квалификации стоматологов)

АМЕРИКАН ДЕНТАЛ АКАДЕМИ
имени Н.С. Селезневой

- Практические семинары
и лекции
- Обучение, ориентированное
на внедрение мировых
стандартов в
стоматологическую практику
- Высококвалифицированные
американские специалисты

Регистрация по тел.:
(812) 327-80-04
www.ada-org.com

**Американо-Российская
Компания "АРКОМ"**

Санкт-Петербург ... (812) 336-77-17
Москва (495) 785-21-81
Киев (044) 235-40-38
Алматы (727) 263-91-13
Екатеринбург (343) 383-40-65
Самара (846) 276-69-05
Новосибирск (383) 354-99-82

e-mail: arkom@arkom-org.com
www.arkom-org.com

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР — 8-800-700-25-25

Гарантийный талон

(Заполняется продавцом)



Внимание:

информация о покупке должна быть указана разборчиво и полностью!

Изделие:

Название модели:

Дата покупки:

Штамп и подпись продавца:

Бесплатный телефон для справок по гарантийному обслуживанию: 8-800-700-25-25 (по всей России) (812)327-03-53, (495) 785-21-81, . (846) 276-69-05, (343) 383-40-65, 8-913-941-77-71

Гарантийный срок – 1 год с даты покупки.

Ирригатор Waterpik является товаром для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях и не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55)

Настоящая гарантия не распространяется:

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки указанным в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.
- Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить гарантийный талон и прибор в полной комплектации. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые не заполнены или не полностью заполнены продавцом, с исправлениями.