

СКЛАДНОЙ ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА Rio модель DCTF







TRAVEL WATER FLOSSER & ORAL IRRIGATOR™



 the beauty specialists

ИНФОРМАЦИЯ О ИРРИГАТОРЕ DCTF

- A - Кнопка отсоединения насадки
- B - Насадка
- C - Емкость для воды
- D - Крышка емкости для воды
- E - Индикатор заряда батареи
- F - Разъем для зарядки
- G - Переключатель
- H - Основной блок
- I - Линия использования

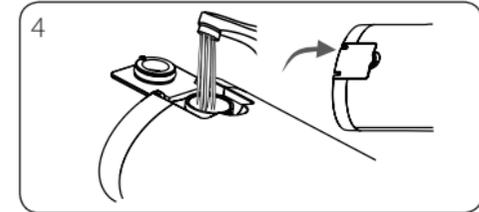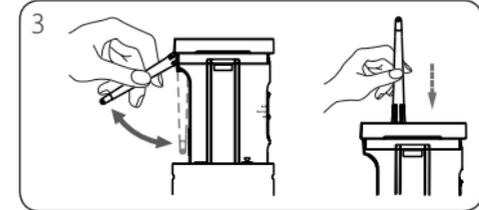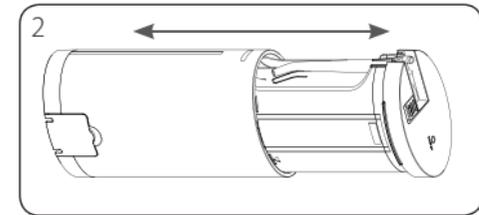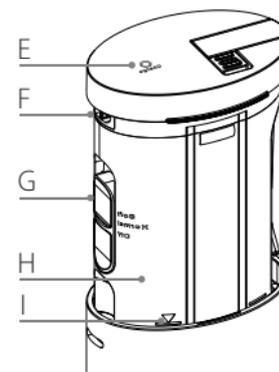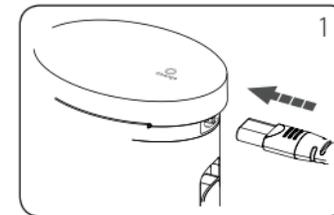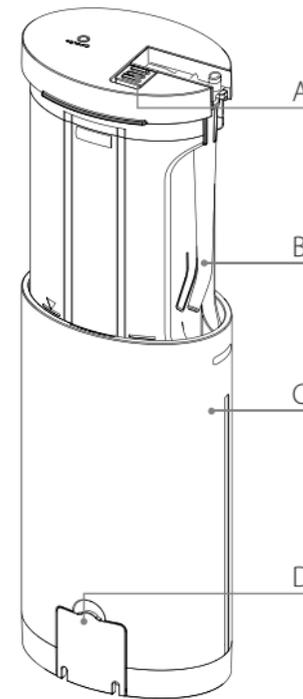

ВНИМАНИЕ

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.



- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, либо обладающими недостаточным опытом и знаниями, под присмотром или после предоставления инструкций по безопасному использованию прибора при условии понимания ими существующих рисков. Его использование в качестве детской игрушки не допускается. Очистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Данный прибор должен использоваться только при безопасном сверхнизком напряжении, в соответствии с маркировкой. В случае повреждения сетевого адаптера или шнура эксплуатацию прибора следует прекратить. В этом случае следует обратиться в сервисный центр для замены устройства.
- НЕ разбирать и не ремонтировать. В приборе отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.
- **Ирригатор с водой старайтесь не переворачивать во избежание попадания воды на управляющие платы внутри прибора.**
- Не погружайте прибор в воду. Запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Только для наружного применения.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор при наличии неисправности, а также после падения или повреждения прибора.
- Перед заполнением прибора водой или выполнением очистки емкости для воды, убедитесь в том, что ирригатор отсоединен от источника питания.
- Храните прибор в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не храните прибор в местах, где существует опасность падения в ванну или раковину.

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте приближения прибора к оборудованию, чувствительному к попаданию воды.
- Перед помещением на хранение данное устройство и его насадку (насадки) следует тщательно промыть мыльной водой и просушить во избежание размножения в нем бактерий.
- Заполнение емкости водой, температура которой превышает 40°C, не допускается.
- Наполняйте емкость только водой или только растворами, специально разработанными для использования в ирригаторах!
- Данный прибор следует использовать только по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по применению.
- Перед началом использования прибора лицам, перенесшим в течение последних 2 месяцев челюстно-лицевые или стоматологические операции, следует проконсультироваться со стоматологом.
- Не прижимайте насадку к зубам или деснам слишком плотно. Это может привести к травме.
- Использование прибора при наличии открытых ран на языке или в полости рта не допускается.
- Не используйте прибор при ношении во рту ювелирных изделий. Перед использованием удалить все украшения из ротовой полости.
- Не используйте в ирригаторе жидкости с содержанием йода, отбеливающих компонентов или масла чайного дерева.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

A - Кнопка отсоединения насадки	E - Индикатор заряда батареи
B - Насадка	F - Разъем для зарядки
C - Емкость для воды	G - Переключатель
D - Крышка емкости для воды	H - Основной блок
	I - Линия использования

ВАЖНО: Перед первым использованием следует удалить возможные остатки воды в емкости и промыть емкость. Это оставшаяся дистиллированная вода, которая использовалась для испытания потока воды. Она не представляет опасности для здоровья и гигиены.

Ирригатор нельзя использовать без воды в емкости (нужно отключать прибор), во избежание возможного образования воздушных пробок в насосе двигателя.

ЗАРЯДКА

ВАЖНО: Перед первым использованием прибора зарядку следует осуществлять в течение 8 часов. Подключите кабель зарядного устройства к зарядному гнезду прибора (1) и подключите его к источнику питания. При этом включится индикатор зарядки.

ВАЖНО: Перед подключением к источнику питания убедитесь, что в зарядном гнезде нет воды.



ПРОГРАММЫ

Нормальный режим

Предназначен для удаления застрявших частиц пищи между зубами (брекетами, мостами, коронками и т.д.)

Мягкий режим

Предназначен для чувствительных десен.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Удерживайте верхнюю часть прибора и сдвиньте емкость вниз (2).
2. Поверните насадку вверх до щелчка в положении (3).
3. Откройте крышку емкости для воды, заполните емкость для воды и закройте крышку (4).


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наклонитесь над раковиной и держите рот немного приоткрытым для обеспечения свободной циркуляции и тока воды.


Включите, выбрав «Мягкий режим» для чувствительных десен, или «Нормальный режим» для нечувствительных десен.

Старайтесь держать прибор вертикально.

Направьте струю воды на зубы под углом 90° к линии десен и медленно начните очистку зубов и десен с внутренней и внешней стороны верхней и нижней челюстей.

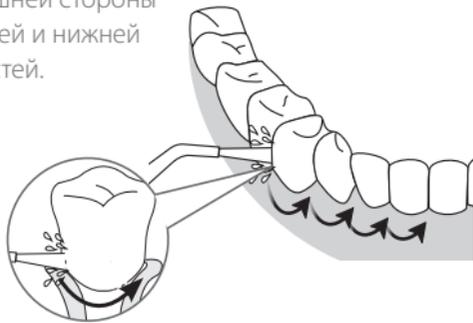

Следует тщательно очищать пространство между зубами и вокруг брекетов, коронок или мостов.

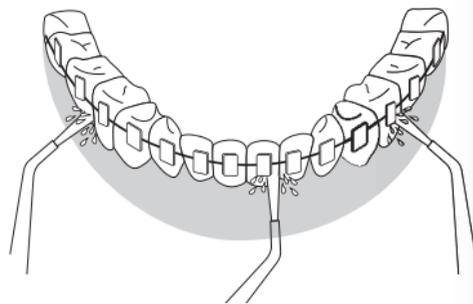

Не используйте прибор при возникновении болевых ощущений или повышенной чувствительности и проконсультируйтесь со своим стоматологом.


ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выключите прибор.

1. Откройте крышку емкости для воды и вылейте оставшуюся воду.
2. Включите «нормальный режим», чтобы слить любую жидкость, оставшуюся внутри прибора и насадки.
3. Для того, чтобы снять насадку, необходимо нажать кнопку отсоединения.

Важно: перед помещением на хранение данное устройство и его насадку (насадки) следует тщательно промыть мыльной водой и просушить во избежание размножения в них бактерий.

Насадку и емкость для воды можно удалить для очистки. Чтобы снять насадку, сдвиньте ее из поворотного фиксатора. Чтобы снять емкость для воды, потяните вниз за начальной точкой останова.

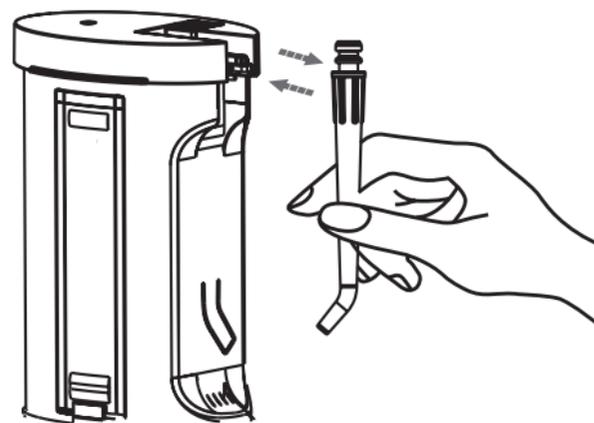

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальный режим: 630 кПа

Мягкий режим: 280 кПа

Максимальный объем резервуара: 180 мл

Пульсация: 1400 ипульсов/мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ирригатор DCTF - 1 шт.

Сменные насадки - 2шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Инструкция на русском - 1шт.

УТИЛИЗАЦИЯ



Существует Директива ЕС об утилизации электротехнического и электронного оборудования (2012/19/EU) по утилизации продукции с использованием самых современных технологий утилизации и регенерации с целью минимизации воздействия на окружающую среду, правильного обращения с опасными веществами и сокращения площадей захоронения отходов. Данный прибор классифицируется как электрический, или электронный, поэтому по окончании срока службы необходимо утилизировать его правильным образом, в соответствии с местными законодательными требованиями. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вывозить устройство на свалку вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЯ

- Гарантийные обязательства на прибор действительны в течение 12 месяцев с даты приобретения в розничной сети. Датой приобретения считается дата указанная в гарантийном талоне или в кассовом чеке.
- Настоящие гарантийные обязательства действительны только при предъявлении правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (серийный номер модели, даты продажи, подписи продавца, печать или штамп магазина) и кассового чека. Не допускается внесение в гарантийный талон каких-либо изменений и исправлений.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, которые были повреждены в результате небрежного обращения, несоблюдения инструкции по пользованию прибором, неправильной установки, постороннего вмешательства в электрическую схему изделия или выполнения ремонта в организации, официально не уполномоченной изготовителем на проведение данных работ, повреждений во время перевозки или же в результате обстоятельств, не являющихся следствием дефекта изготовления прибора, воздействия на изделие обстоятельств неодолимой силы (молния, пожар и т.д.), попадания внутрь изделия жидкостей, посторонних предметов, насекомых и животных, отклонения значений напряжений питающих сетей, к которым подключено изделие, от норм Государственных технических стандартов.
- Все условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на быстро изнашивающиеся части (насадки).
- Мы не несем ответственность за прямой или косвенный ущерб людям, имуществу или домашним животным, ставший следствием несоблюдения всех требований приведенных в данной инструкции по эксплуатации по установке, эксплуатации и обслуживанию прибора.
- В течение гарантийного срока дефектный прибор, при предъявлении гарантийного талона и кассового чека с указанием даты приобретения, будет бесплатно отремонтирован или заменен на новый.

Срок службы прибора – 5 лет.

Фирма производитель – Дезак групп, Дезак хаус, Монтиллер стрит, Челтенхам GL50 1SS, Великобритания. Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма продавец _____

М.П.

Подпись продавца _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

Сервисный центр:

121433, Москва, ул. Минская, 17

тел. (495) 134-44-28

Rio, Dezac и Travel Water Flosser and Oral Irrigator™
являются товарными знаками компании The Dezac Group Ltd

© The Dezac Group Ltd 2018

1-IN-DCTF-EU/1.0