

**Аппарат для
прессотерапии и
лимфодренажа ног**

**Light Feet AMG709
Gezatone**

GÉZA
tone



Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног Light Feet AMG709

- ✿ Как часто после долго дня Ваши ноги отекают, ноют, становятся тяжелыми и гудят?
- ✿ Эти явления связаны с множеством факторов: неудобная обувь, высокий каблук, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни провоцируют застой крови и лимфы в нижних конечностях.
- ✿ К сожалению, отеки и тяжесть в ногах не так безобидны, как кажется, ведь если с этим никак не бороться, то может развиваться варикозная болезнь вен.

**Прессотерапия в домашних условиях с
Light Feet – залог здоровья и красоты
Ваших ног!**

Показания к применению Light Feet AMG709



Если Вы, ощущаете тяжесть в ногах после рабочего дня!



Если Вы, долгое время проводите на ногах: продавцы-консультанты, преподаватели, парикмахеры, и т.д.



Если Вы, часто и подолгу находитесь за рулем.



Если Вы, ведете малоподвижный образ жизни.



Если Вас беспокоят отеки и одутловатость нижних конечностей.



Если Вы, хотите предотвратить развитие варикоза.



Если Вы, любите обувь на высоких каблуках, и при этом заботитесь о красоте и здоровье своих ног!

Забудьте о тяжести и отеках в ногах, ощутите забытую легкость и предотвратите развитие варикоза.


А поможет Вам в этом удобный, стильный и компактный пневмомассажер для ног Gezatone Light Feet AMG709!

Компактный пневмомассажер для ног предназначен для противоотечного, расслабляющего массажа стоп и голеней, является прекрасной профилактикой варикозного расширения, снимает усталость и тяжесть в ногах.



Прессотерапия – что это такое?

- Прессотерапия – это методика массажного воздействия на кожу и подкожные ткани путем изменения давления воздуха, которое приводит к усилению циркуляции крови и лимфы в данной области, снятию спазма мышц, улучшению работы сосудов.
- Эта технология очень востребована в салонах, ведь она прекрасно снимает отеки, снимает спазм мышц, возвращает им нормальный тонус, стимулирует местное кровоснабжение.
- К счастью, теперь методика компрессионного массажа не требует больших затрат и посещений профессиональных массажных кабинетов – ведь с массажером Light Feet можно проводить прессотерапию стоп дома и даже на работе!

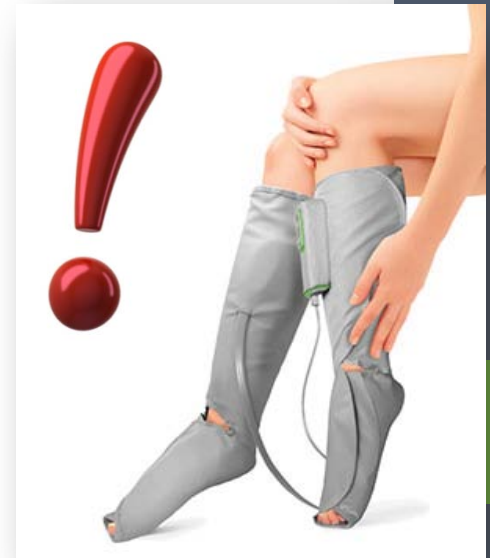

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Аппарата для ног Light Feet AMG709 Gezatone

- Домашний аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног Light Feet – удобство, комфорт и непревзойденная эффективность!
- Компрессионный массажер для ног AMG709 это портативный прибор для прессотерапии икроножных мышц и стоп, специально разработанный для проведения процедур в домашних условиях.
- Прибор имеет форму сапожек, который надевают на ноги и удобно крепятся с помощью широких липучек. Аппарат нежно сжимает ноги по направлению от периферии к центру, создавая эффект компрессии.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Аппарата для ног Light Feet AMG709 Gezatone

Таймер воздействия запрограммирован на 15 минутную процедуру, которой достаточно, чтобы снять спазм, устранить отеки и улучшить общее самочувствие.

Домашний аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног AMG709 работает от сетевого адаптера, что позволяет поддерживать оптимальную интенсивность воздействия и не требует замены батареек.

Два режима интенсивности прессмассажа позволяют выбрать оптимальный именно для Вас, чтобы Вы могли достичь отличных результатов.



Панель управления

POWER - включение/
выключение

Intensity - интенсивность
массажа

Low - низкая
интенсивность

Hi - высокая
интенсивность

Эффекты компрессионного массажа ног Light Feet AMG709 Gezatone

- Аппарат прессотерапии Light Feet позволяет быстро снять отеки и тяжесть в ногах.
- Благодаря компрессии улучшается приток крови к проблемным участкам, улучшается работа сосудов.



- Массажер для ног электрический Light Feet AMG709 быстро устраняет спазм мышц, помогая расслабиться и восстановить работоспособность.
- Компрессионный массаж ног при варикозе на начальных стадиях позволяет значительно улучшить состояние вен, избавиться от отеков и застоя крови.
- Прессотерапия – это отличный лимфодренаж и профилактика варикозного расширения вен.

Выгоды от приобретения Light Feet AMG709 Gezatone



- ✓ Регулярный прессмассаж способствует очищению тканей и сосудов от продуктов метаболизма.
- ✓ Способствует поддержанию оптимального водно-солевого баланса.
- ✓ Эффективно снимет отеки.
- ✓ Предотвращая застой жидкости в ногах.
- ✓ Прибор удобен и прост в применении.
- ✓ Подходит для мужчин и для женщин.
- ✓ Абсолютно безболезненно.
- ✓ Всего 15 минут в день в комфортных домашних условиях и Вы забудете о тяжести и отеках в ногах, ощутите забытую легкость и предотвратите развитие варикоза.



Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног Light Feet AMG709

противопоказания и ограничения.

- Беременность.
- Наличие электронных медицинских устройств в организме, как, например, кардиостимулятор.
- Туберкулез.
- Флебит или тромбоз вен.
- Диабет.
- Наличие медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри.
- Дисфункция суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
- Высокий риск развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.

- Внимание! Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим.
- Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Технические характеристики и гарантии

Технические характеристики

- Блок питания: 100-240 В 50/60 Гц; ВЫХОД: 6,0 В 1,0А
- Номинальная мощность: 6 Вт.
- Давление воздуха при высокой интенсивности: 26 кПа \pm 2 кПа
- Давление воздуха при низкой интенсивности: 16 кПа \pm 2 кПа
- Рабочая температура: +10~+40 при относит. влажности 30~85%
- Температура хранения: -20~+60 при относит. влажности 10~95%

Гарантии

- Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн. Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция
- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.
- Товар сертифицирован.
- Артикул: 1301145
- ШК EAN13: 3004564029443
- Кол-во в ящ.: 10



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МОСКВА: (495) 925-00-34

РЕГИОНЫ РФ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ):

8-800-200-00-34

www.sozv.ru

info@sozv.ru