



Купить весы Momert

Диагностические весы Momert. Гарантия качества. Звоните и заказывайте!

pro-medic.ru >

LAICA[®] ITALY



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ ВЕСЫ Модель PS3003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Производитель: www.laica.it

Дистрибьютор: www.rubikom.ru

www.laica.it

Введение

Поздравляем Вас! Вы приобрели современное устройство для взвешивания новорожденных – электронные детские весы LAICA, Италия, модель PS3003.

Регулярное взвешивание необходимо для контроля развития ребенка.

Весы разработаны компанией LAICA, Италия, www.laica.it
Весы оборудованы дополнительными электронными функциями:

- «Тарирование» - обеспечивает точность измерений;
- «Стабилизация» - позволяет точно определять вес малыша даже если он ведет себя беспокойно;
- «Разность измерений» - функция, вычисляющая разницу между последним и предпоследним измерением.

Дизайн чаши весов разработан для обеспечения комфортного взвешивания малыша.

Оглавление

1. Комплектность	3
2. Описание	4
3. Подготовка к работе	4
4. Эксплуатация	5
5. Меры предосторожности	7
6. Технические характеристики	8
7. Гарантийные обязательства	9

1. Комплектность

1. Электронные весы
2. Руководство пользователя

3

3.2. Установка батареек.

Используйте батарейки только указанного в инструкции типа (тип AAA, ALKALINE).

Откройте крышку отсека для батареек на нижней части весов, вставьте новые батарейки согласно указанной полярности («+» и «-»).

Закройте крышку отсека для батареек.

Убедитесь в том, что весы работают, включив их кнопкой on/off. Если весы не включаются, проверьте правильность установки полярности батареек.

3.3. Выбор единиц измерения.

После включения весов нажмите кнопку UNIT для выбора единиц измерения: килограммы или фунты. Допустимая нагрузка весов 25 кг с дискретностью 10 грамм или 55 фунтов с дискретностью 0,02 фунта. На дисплее весов отображается «0.00 kg» или «0.00 lb». Для изменения единицы измерения нажмите на кнопку «UNIT».

4. Эксплуатация

4.1. Включите весы с помощью кнопки «ON/OFF». На дисплее отобразится «8888». Подождите, пока на дисплее не появится изображение «0.00». Весы готовы к работе.

4.2. Положите ребенка на весы и подождите, пока на дисплее отобразится вес ребенка. Если ребенок постоянно находится в движении и весы показывают разный вес, необходимо нажать кнопку «HOLD», чтобы активировать функцию «Стабилизация». Пока весы будут высчитывать автоматически вес ребенка, исходя из всех полученных данных, цифры на дисплее будут мигать. Когда мигание прекратится, на дисплее на несколько секунд отобразится вес ребенка. Затем весы отключатся автоматически.

5

2. Описание

2.1. Функции

Настоящие весы обеспечивают запоминание данных последнего взвешивания, а также обладают дополнительными функциями:

- 2.1.1. Функция «Тарирование» позволяет Вам взвесить ребенка, не учитывая вес пеленки, на которой лежит малыш.
- 2.1.2. Функция «Стабилизация» обеспечит точное взвешивание, даже если малыш ведет себя беспокойно
- 2.1.3. Функция «Разность измерений»: при очередном взвешивании весы рассчитывают и показывают разницу между текущим и предшествующем текущему измерениями.

2.2. Функциональные кнопки

ON/OFF - кнопка включения / выключения весов.
UNIT - кнопка выбора единиц измерения: килограммы или фунты.

HOLD - кнопка активизации функций «Стабилизация» и вычисление разницы от предыдущего измерения.

TARE - кнопка функции «Тарирование» - позволяющей взвешивать ребенка без учета пеленки.

2.3. Специальные обозначения

«LO» - указывает на низкий заряд батареек. Необходимо их заменить.

«ERR» - вес слишком большой.

Весы готовы к использованию, когда на экране появляется «0.00». При использовании весов в несоответствии с инструкцией, на дисплее отображаются символы: «ERR» или «---».

3. Подготовка к работе

3.1. Установите весы на горизонтальную жесткую поверхность. Если установить весы на мягкую поверхность (например, ковер, линолеум), это может привести к неточным показаниям.

4

4.3. Измерение веса ребенка без учета веса пеленки, на которой лежит малыш:

- включите весы с помощью кнопки «ON/OFF». На дисплее отобразится «8888»;
- подождите, пока на дисплее не появится изображение «0.00». Затем положите ребенка на весы пеленку или полотенце;
- нажмите на кнопку «TARE» и дождитесь, пока не появится «0.00». Весы готовы к работе.

4.4. При следующем включении весов на дисплее отобразится предыдущее измерение (рисунок 1), затем «0.00». После этого положите ребенка на весы; подождите, пока на дисплее появится вес ребенка, и нажмите кнопку «HOLD».

При этом активизируется функция «Стабилизация» и весы подсчитают изменение веса в сравнении с предыдущим измерением.

После фиксации измеренного веса с помощью функции стабилизации «HOLD», на дисплее весов будет поочередно отображаться следующая информация:

- вес ребенка
- изменение веса относительно предыдущего измерения (в случае уменьшения веса изменение отобразится со знаком «DOWN+ ↓», рисунок 2; в случае увеличения, на дисплее отобразится изменение веса со знаком «UP+ ↑», рисунок 3).

Весы отключатся автоматически через несколько секунд. Вы можете отключить устройство самостоятельно, нажав кнопку «ON/OFF».

Внимание! При извлечении батареек или потери ими заряда, сохраненные измерения в памяти будут стерты автоматически.

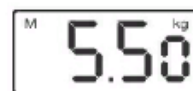


Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

6

