



Εἰς τὴν ἀγορὰν τῆς ἰατρικῆς ἐπιπέδου

**WATERPIK WP-112**

[www.waterpik-shop.ru](http://www.waterpik-shop.ru)

Εἰς τὸν ὀριζόντιο ἰσθμὸν τῆς ἐπιπέδου ἔκδοσης

# Όι έάάθναεύι ύέ έδδεάαοι δ άέύ ιί έί ηόε δάα WaterPik 112

## ΟΑΟΙ Ε×ΑΝΕΕΑ ΟΑΔΑΕΟΑΔΕΝΟΕΕΕ



Υέάεοδι ί έοαι έά: 220 Α  
Άάάεί έά άί άύ 220 620 έί ά  
1200 έι ί όέυηί ά ά ί έί όό.

## Ι ΑΒΟ Ι ΔΑΑΤ ΝΟΤ ΔΤ ΑΕΙ Ι ΝΟΕ

Εί άάά Αύ έηί ί εύόόάά ύέάεοδε+άηέά ί δεάί δύ, ί ηί άάί ί ί άηέε άί ί δε άί δά ί ί άό άί άδούηύ άάε, ί άί άοί άέι ί ηέάάί άαού ί ηί ί άί ύι ί άδαι ί δά άί ηοί δί άεί ί ηε.

Ι ΔΤ ×ΕΟΑΕΟΑ ΑΝΑ ΕΙ ΝΟΘΟΕΟΕΕ Ι ΑΔΑΑ ΕΝΙ Ι ΕΥΟΤ ΑΑΙ ΕΑΙ .

### Ι ΔΑΑΤ ΝΟΑΔΑΕΑΙ ΕΑ:

×οί άύ ηί έçέού δέηέ ί ί δάάάί έύ ύέάεοδε+άηέέι όί έί ί :

- Άηάάά ί δέεþ÷άέόά ί δεάί δ ί δ ηάε ί ί ηέά έηί ί εύόι άάί έύ
- Ι ά οδι άάέόά ύέάεοδε+άηέέέ οί όδ άέάάί ύι έ δέάι έ.
- Ι ά ί ηόάάέύέόά ί δεάί δ όάι , ί δέόάά ί ί ί ί άό όί άηού έ ί ί ί άηού ά άί άό.
- Ι ά έηί ί εύόόέόά ί δεάί δ άί άδαι ύ ί δέί ύόέύ άάί ί.
- Ι ά ί ί άδóάέόά ί δεάί δ ά άί άό έέέ άδóάóþ άέάέί ηού.
- Ι ά οδι άάέόά ί δεάί δ, άηέε ί ί όί άέ ά άί άό. Α ύοί ί ηέó÷άά, άύέéþ÷έόά άάί έç ηάε ί άί άέάί ί ί.

### ΑΙ ΕΙ ΑΙ ΕΑ:

×οί άύ ηί έçέού δέηέ ί άί άί ά, ύέάεοδε+άηέί άί οί έά, άί çάί δαι έύ, ηάδύάç ί ύó ί ί άδóάάί έέ ί ύάέό όέάί άέ ί ί έί ηόε δάα:


- Ι ά έηί ί εύόόέόά ί δεάί δ, άηέε ό ί άί ί ί άδóάάί ί δί άί ά έέέ άέέέά, άηέε ί ί ί ά δάί δάάό άί έάί ύι ί άδóçί , άηέε ί ί ί άάέ, άύέ ί ί άδóάάί έέέ ί ί άδóάάέηύ ά έþάóþ άέάέί ηού. Νάύάέόáηú η ί δάáηóáάέόáέýι έ WaterPik Technologies.
- Ι δί έί ηόδóέόέδóέόά έ ί δέηί άδδéάάέόά çá ááóùι έ έ έþáùι έ η ί άδαι έ÷άί ί ύι έ άί çί ί άί ί ηόýι έ, ÷οί άύ ί ί έ ί ί εύόι άάέέηú ί δεάί δί ί ί δάάέεύί ί.


- Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите инструкцию по применению для правильного использования прибора.
- Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в инструкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы WaterPik Technologies.
- Не отделяйте эластичную насадку Pik Pocket от прозрачной части насадки. Если она отделилась по какой-то причине, выбросьте обе части насадки и впоследствии пользуйтесь новой насадкой Pik Pocket.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится.
- Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.
- Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.
- Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте, если у Вас в полости рта есть ювелирные украшения. Извлеките их перед применением.
- Не используйте прибор, если у Вас открытая рана на языке.
- Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед процедурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Вашего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого другого устройства для гигиены полости рта.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок

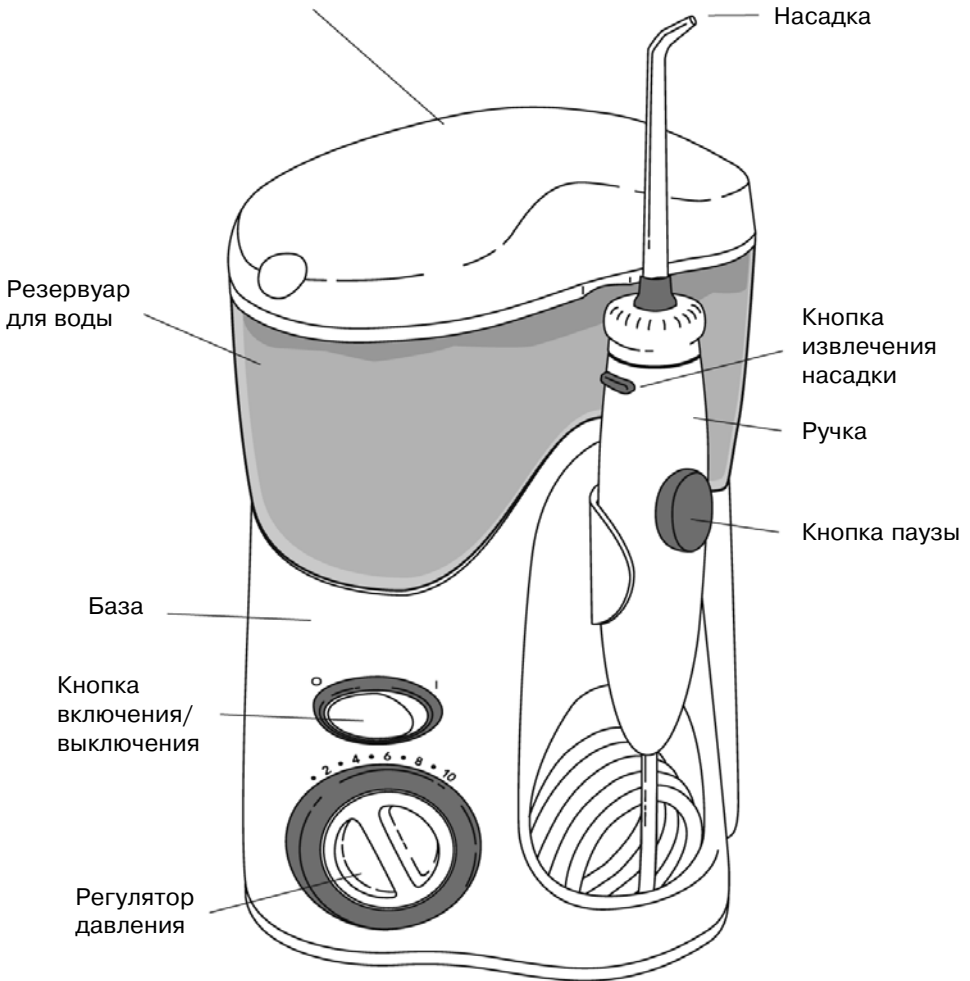


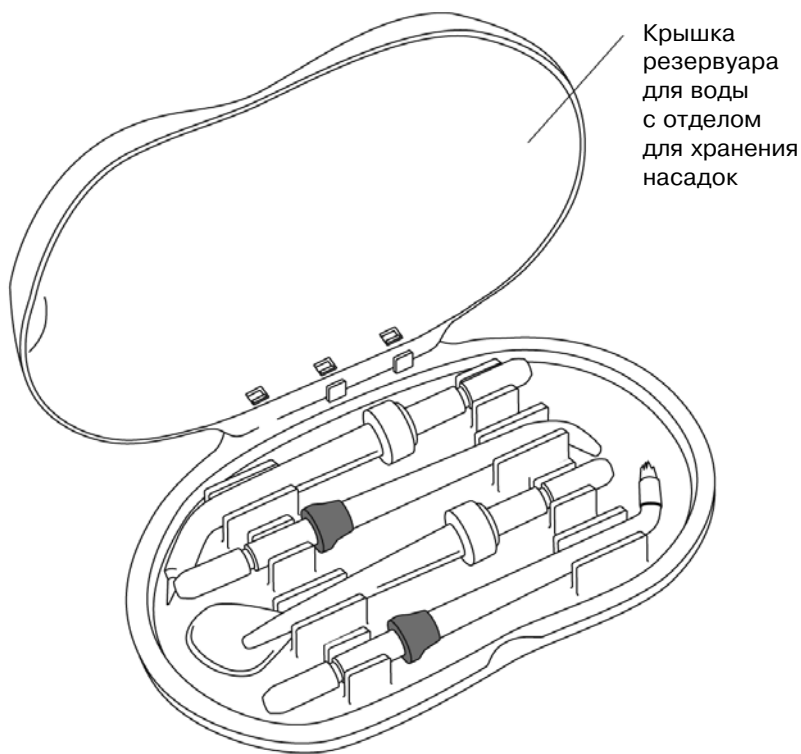


Насадка стандартная



Насадка для чистки языка

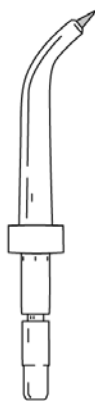

Насадка Pik Pocket (для чистки десневых карманов)

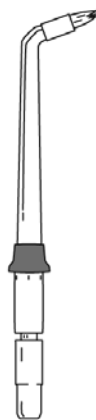

Ортодонтическая насадка (для чистки брекет-систем)

## ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подключите прибор к электрической сети. Если розетка имеет выключатель, убедитесь что розетка включена.



### **Подготовка резервуара.**

Достаньте резервуар с крышкой из базы. Заполните резервуар теплой водой. Расположите резервуар в базе, приложив небольшое равномерное усилие сверху.

### **Установка и снятие сменных насадок.**

Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к ручке, если насадка установлена правильно.

Для извлечения насадки нажмите кнопку извлечения насадки и потяните насадку на себя из ручки ирригатора.

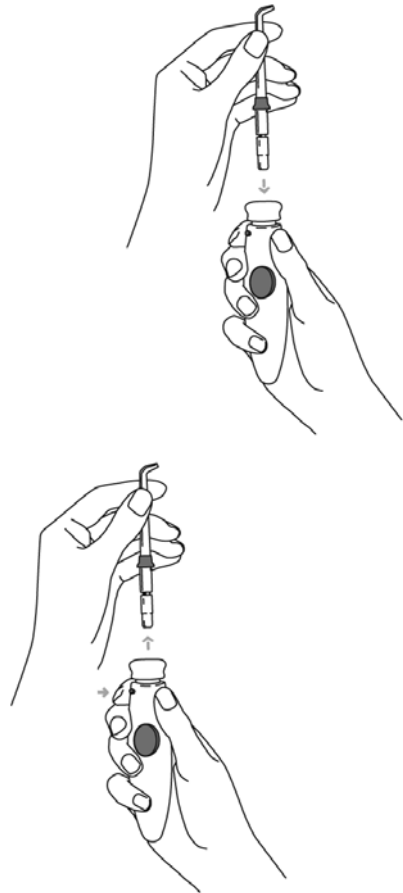
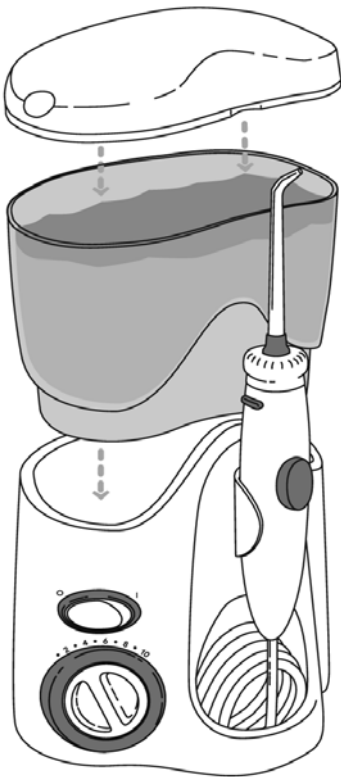


### **Выбор уровня давления воды.**

Переведите регулятор давления на базе в крайнее левое положение — минимальное давление воды. Постепенно увеличивайте давление до необходимого Вам уровня, который Вы выберете сами или Вам подскажет Ваш стоматолог.

### **Расположение во рту.**

Расположите насадку в ротовой полости. Направьте кончик насадки на зубы. Свободной рукой включите прибор. Установите давление воды на нужный Вам уровень.

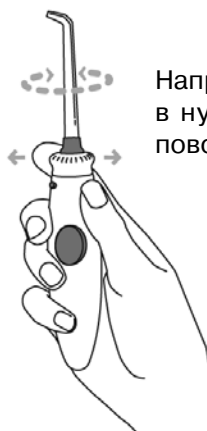
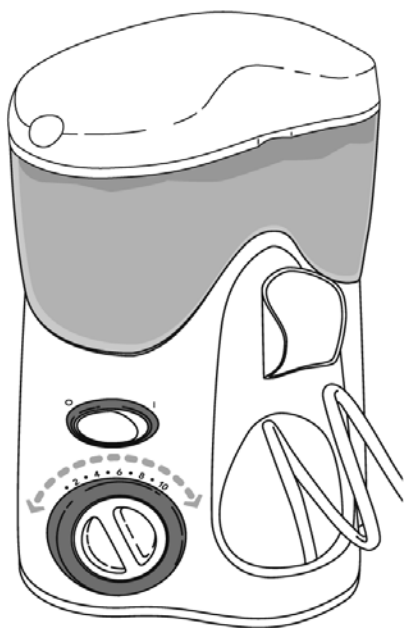


Направляйте струю в нужном направлении, поворачивая насадку.

### Рекомендованная техника.

Направляйте струю воды под углом 90 градусов к линии десны. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания воды, но не закрывайте рот, давая воде свободно вытекать наружу.

Для лучших результатов начинайте с боковых, дальних зубов, двигаясь к передним зубам. Перемещайте насадку от зуба к зубу, делая паузы между зубами. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг зубов и между зубами не станут чистыми.

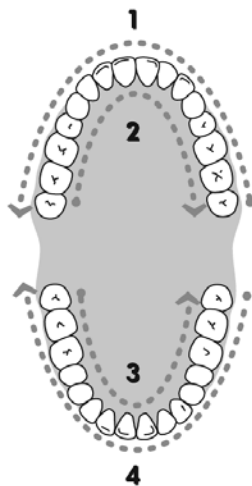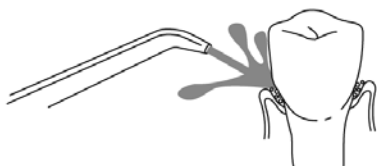

### Пауза.

Вы можете на время прекратить подачу воды нажатием кнопки паузы на ручке.

### После завершения чистки.

Выключите прибор. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара. Отключите прибор от сети.





## СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ


### **Насадка Pik Pocket.**

Насадка Pik Pocket позволяет подавать воду или антибактериальный раствор непосредственно в периодонтальные карманы. Для этого расположите мягкий кончик насадки напротив зуба под углом в 45 градусов и аккуратно заведите насадку под линию десны, в карман. Включите прибор при минимальном уровне давления воды и производите чистку, продвигая насадку между зубами и вдоль линии десны. Продолжайте чистку до тех пор, пока резервуар не опустеет.



### **Насадка для чистки языка.**

Расположите насадку на языке, включите ирригатор при минимальном уровне давления воды и увеличивайте уровень давления до комфортной для Вас степени. Аккуратно расположите насадку на центр языка и, прилагая небольшое усилие, тяните насадку вдоль языка.

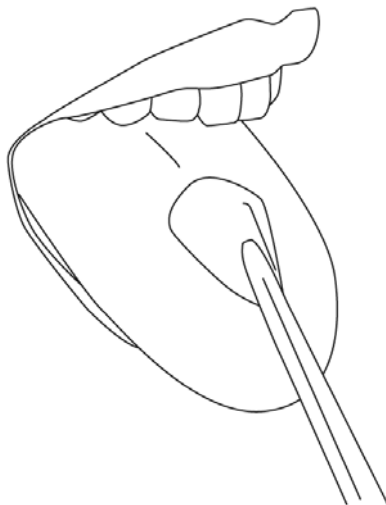

центре WaterPik Technologies. Официальный дистрибьютор в России — ЗАО "Арком". (812)327 0353. E-mail:arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор полностью исправен и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользователю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки, и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по гарантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не был физически поврежден потребителем и работал только с насадками и аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купите дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представителей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас посетить наш сайт — [www.arkom-org.com](http://www.arkom-org.com)

## **ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Причина	Действия по устранению неисправности
<b>Насадки и насадка для чистки языка</b> Протечки между насадкой и поворотным механизмом насадки	Насадка установлена неправильно	Снимите насадку и установите снова
<b>Насадка Pik Pocket</b> Течь мягкого кончика	Кончик порван	Замените насадку
<b>База прибора</b> Течет шланг к ручке	Поврежден шланг	Может быть заменен в авторизованном центре WaterPik, или Вы можете запросить ремонтный комплект для самостоятельного устранения неисправности
Течет резервуар	Резервуар неправильно расположен на базе или клапан резервуара перевернут	Заменить клапан резервуара (Позвоните в сервисный центр WaterPik Technologies). Переверните клапан
Плохое давление/ не идет вода	Резервуар неправильно расположен на базе	Переустановите резервуар. Приложите небольшое равномерное усилие сверху на резервуар.
Прибор не включается	Мотор не работает	Убедитесь, что в сети есть ток. Для этого подключите к сети другое электрическое устройство и включите его.

