


РУССКИЙ

Рекомендации покупателю

При покупке прибора необходимо проверить его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на комплектность. Необходимо проверить наличие гарантийного талона и правильность его заполнения (наличие печати продавца и продавца). Необходимо сохранять кассовый чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. Документация, прилагаемая к прибору при утрате, не возобновляется. При обращении в сервисный центр, если невозможно определить дату покупки, гарантийный срок определяется, начиная с даты производства изделия.

ОПИСАНИЕ

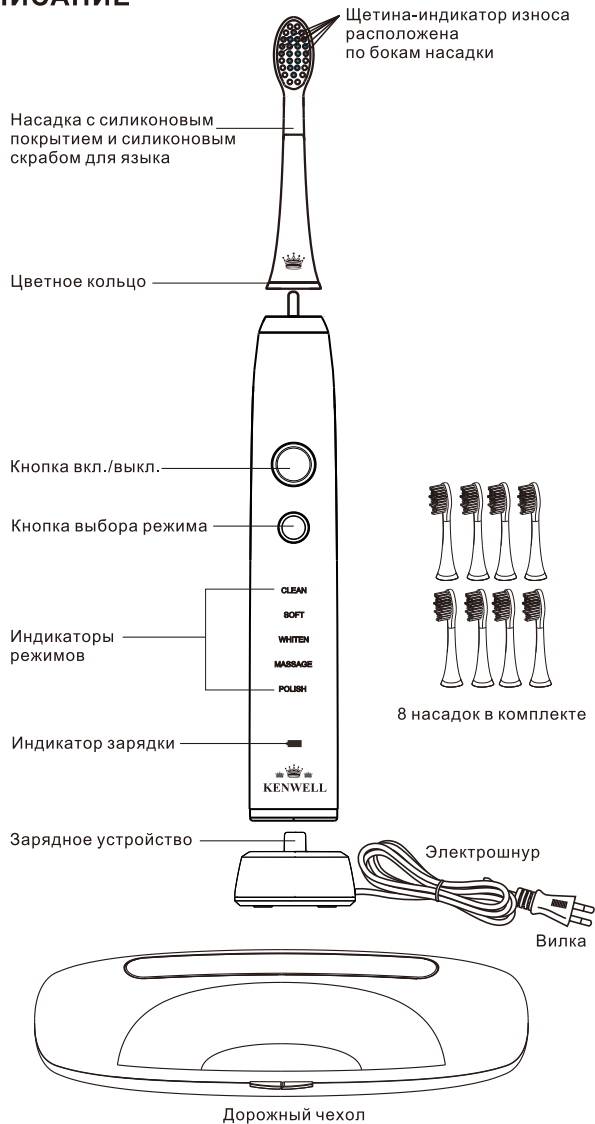

Техника безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности прежде, чем использовать данный прибор. Инструкции по технике безопасности приведены здесь чтобы помочь вам использовать этот прибор безопасно и правильно, а также, чтобы предотвратить получение травм вами или окружающими людьми.

Опасность - вода

- Не пользуйтесь зарядным устройством в ванной.
- Не опускайте зарядное устройство в воду, не мойте зарядное устройство водой или другой жидкостью.
- Не устанавливайте и не храните устройство, там, где оно может упасть или быть сброшенным в воду.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству, упавшему в воду. Сначала отключите его от сети, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не касайтесь вилки мокрыми руками.

Опасность - напряжение

Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на тех. этикетке зарядного устройства напряжению Вашей электросети.

1. Сетевой шнур прибора нельзя заменять самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр. Не используйте прибор, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили, если он упал в воду. Прекратите использование и обратитесь в специализированный сервисный центр.
2. Не повреждайте, не разрезайте и не модифицируйте сетевой шнур. Не сгибайте, не тяните и не перекручивайте шнур с применением силы. Не ставьте тяжелые предметы на шнур, не допускайте, чтобы шнур был зажат между предметами.
3. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Преобразователи напряжения не гарантируют совместимость.
4. Отключите зарядное устройство от сети перед проведением технического обслуживания или очистки.
5. Не используйте зарядное устройство на улице или рядом с горячими поверхностями.

Внимание

1. Используйте прибор только по назначению, как описано в данной инструкции. Используйте только оригинальные аксессуары.
2. Прибор может быть использован детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний только под присмотром или если они должным образом проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимания опасностей, которые могут возникнуть при его использовании. Очистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
3. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Не ударяйте, не роняйте прибор.
5. Не пытайтесь извлечь аккумулятор.
6. Не кладите на зарядное устройство металлические предметы, такие как, например, монеты или скрепки.
7. Если зубная паста содержит перексид, питьевую соду или другие бикарбонаты (общепринятые в отбеливающих зубных пастах), тщательно очищайте насадку и рабочую ручку во избежание трещин на пластике.
8. Не мойте прибор в посудомоечной машине.

9. Насадки прибора являются предметами личной гигиены и не попадают под гарантию производителя.

Способы очистки поверхностей прибора, контактирующие с кожей и руками, описаны в разделе "Уход и обслуживание".

10. Если вы испытываете дискомфорт или боль во рту, прекратите использование этого прибора и свяжитесь со стоматологом.
11. Если у вас была операция челюстно-лицевой хирургии или хирургии десен в период последних 2 месяцев, обратитесь к своему стоматологу, прежде чем использовать этот прибор.
12. Зубная щетка была проверена и соответствует стандартам безопасности для электромагнитных приборов. Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, обратитесь к врачу или производителю имплантированного прибора перед использованием зубной щетки.
13. Всегда отключайте прибор после использования.
14. Никогда не используйте прибор если вы сонливы.

Начало работы

Зарядка зубной щетки.

Обязательно выключите зубную щетку перед зарядкой. Подключите вилку питания к розетке. Поместите ручку на зарядное устройство. Индикатор заряда будет гореть красным, указывая, что ручка заряжается. После полной зарядки аккумулятора индикатор зарядки загорится зеленым цветом, показывая, что зубная щетка полностью заряжена.

Примечания:

- Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 24 часов.
 - При полной зарядке прибор можно использовать не менее 14 дней.
 - Прибор должен быть заряжен, если:
 - a. это первое использование;
 - b. прибор не используется более трех месяцев;
 - c. если индикатор зарядки мигает красным светом во время использования.
- Чтобы сохранить аккумулятор полностью заряженным, рекомендуем вам держать зубную щетку на зарядном устройстве, когда она не используется.
- Во время зарядки, зубная щетка будет немного нагреваться, это нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Наденьте насадку на штифт ручки.
- Примечание: между цветным кольцом и ручкой будет маленький зазор. (Рис.1)

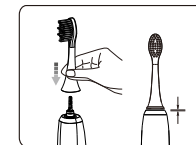


Рис.1

- Намочите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.
- Прислоните щетку к зубам под небольшим углом к линии десен. (Рис.2)

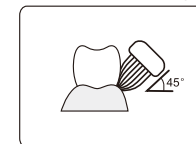


Рис.2

- Нажмите кнопку выбора режима, чтобы выбрать режим.

- a. **CLEAN**: стандартный режим для чистки зубов.
- b. **SOFT**: деликатная чистка зубов. Данный режим рекомендован для пользователей, использующих данный прибор впервые.
- c. **WHITEN**: отбеливание зубов. Используйте отбеливающую пасту.
- d. **MASSAGE**: для нежного массажа десен.
- e. **POLISH**: полировка зубов.

Заметка Режим можно изменить во время использования прибора.

Память Зубная щетка запоминает последний использованный режим и включается на нем при следующем использовании.

После выбора режима нажмите кнопку включения/выключения.

- Слегка надавите, короткими медленными движениями двигайте головку щетки горизонтально вправо и влево по зубам.

Чтобы эффект от чистки был максимальный, условно разделите свой рот на 4 секции. Начните с секции 1 и чистите каждую в течение 30 секунд. После каждого интервала в 30 секунд прибор делает паузу, указывая на время перехода к следующей секции. Щетка автоматически выключится через 2 минуты использования. При необходимости включите прибор снова. Действие чистки будет приостанавливаться между каждым 30-секундным интервалом, указывая, когда перейти к следующему разделу. Зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты использования. (Рис.3)

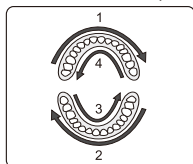


Рис.3

Для продолжения чистки зубов включите прибор снова.

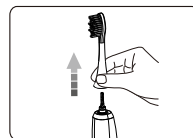


Рис.4

-Для снятия насадки с ручки необходимо потянуть насадку вверх. (Рис.4)

-Прополощите щетку и ручку под проточной водой, высушите перед установкой на зарядное устройство. (Рис.5)



Рис.5

-Установите ручку в зарядное устройство.

Уход и обслуживание

Обязательно выньте вилку из электрической розетки перед чисткой прибора.

Не используйте чистящие средства, скрабы, металлические мочалки или острые предметы для очистки прибора.

Ручка

-Снимите насадку.

-Протрите ручку влажной тканью и поместите ручку обратно в зарядное устройство.

Не погружайте ручку в воду.

- Промывайте насадку и щетину после каждого использования.

-Не мойте прибор и части прибора в посудомоечной машине.

Зарядное устройство

Используя мягкую ткань, протрите зарядное устройство.

Не опускайте зарядное устройство /

сетевой шнур / вилку в воду / иную жидкость.

Периодически очищайте вилку, чтобы она

сохраняла рабочее состояние. Пыль или

грязь, которая собирается на вилке могут повлечь за собой поражение

током, перегрев или возгорание.

НАСАДКИ

Насадки имеют силиконовое покрытие, которое предотвращает повреждение эмали зубов. Не повреждайте покрытие!

- На задней части насадки есть силиконовый скребок для языка.

- Насадки имеют щетинки - индикаторы износа по бокам щетки. Через примерно 2-3 месяца использования щетки, боковые щетинки побелеют. Необходимо поменять старую насадку на новую.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Прибор не работает.	Вы только что приобрели прибор или он не использовался более 3-х месяцев.	Заряжайте прибор не менее 24 часов.
Слабая или сниженная вибрация.	Вы слишком сильно прижимаете щетку к зубам.	Снизьте давление щетки на зубы.
Прибор работает только краткий период времени даже после того, как он был заряжен.	Аккумуляторная батарея закончила свой рабочий цикл.	Отнесите прибор в авторизованный сервисный центр для замены батареи.
	Недостаточное время заряда.	Заряжайте прибор не менее 24 часов.

Технические характеристики:
100-240 В, 50-60 Гц, 0,8-1,6 Вт
Литий-ионный аккумулятор

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики прибора, с целью улучшения его свойств, а также изменять комплектацию и цвет прибора без предварительного уведомления потребителей.



ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, так как электроприбор содержит электрические и электронные компоненты не пригодные для утилизации с бытовым мусором. Сдавая прибор на утилизацию, вы сохраняете природу. Обязательно учитывайте действующее государственное и местное законодательство.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Электрическая звуковая зубная щетка
Модель: RST2060 / RST2061
Дата производства: 01.2019 / Срок хранения: не ограничен.
По всем вопросам и жалобам обращаться в информационный центр.
Тел.:8(925)507-74-46; e-mail: info@ltd-ves.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU С-НК.АЛ33.В.02727
Серия RU № 0372330

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Экспертиза", Юридический адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 2/ помещение №16, фактический адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 1 корпус 2, этаж 2, помещение №16, помещение №16а, помещение №22а, помещение №22б, помещение №22в, Телефон: 74955084342, Аттестат регистрационный № РОСС RU 0001 11АЛ33, 19.07.2013, выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Т.К. Инкомтехпром», Юридический адрес: РОССИЯ, 111250, г. Москва, Солдатская ул., д. 6, стр. 1, фактический адрес: РОССИЯ, 111524, г. Москва, ул. Электроградная, д. 2, стр. 32, ОГРН: 1037739354113, Телефон: +74955077446, Факс: +74955077446, E-mail: info@td-ves.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "VES ELECTRIC LIMITED", Юридический адрес: ГОНКОНГ, Unit 1301, 13/F, Chung Nam Building, 1 Lockhard RD, Wanchai, Адреса филиалов: КИТАЙ, "VES ELECTRIC LIMITED", GUANGZHOU SHI HAIZHU QU TINGYUAN LU 5 HAO 1312 FANG

ПРОДУКЦИЯ: Электрические зубные щетки (в т.ч. ультразвуковые), торговых марок "VES Electric", "CAMRY", "KENWELL", "TZ FIRST", модели: RST2060, RST2061, RST2062, RST2063, RST2064, RST2065, RLT201, RLT203, RLT204, RLT206, RLT231, RLT233, RLT234, RLT236, RLS601, Серийный выпуск


КОД ТН ВЭД ТС 8509800000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический Регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства от 30.12.2015 года № 2772-2015-НДК, проведенного органом по сертификации общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Экспертиза" аттестат регистрационный № РОСС RU 0001 11АЛ33 до 19.07.2018, протоколов испытаний № №93/01N11Е, №94/01N11Е от 12.02.2016 года, RA.RU.21XU/01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации

СПИСОК ДЕЙСТВИЯ С: 15.02.2016 ПО: 14.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


Производитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Неманин В.Н.
(подпись, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))
Скворцов И.Н.
(подпись, фамилия)