

## Портативный ирригатор Рокимед Модель №: RKM-1701

### Обратите внимание


- Продукт **не** является игрушкой!
- Детям младше 14 лет следует использовать ирригатор под наблюдением взрослых.
- Ирригатор предназначен для удаления остатков пищи из межзубных промежутков, брекетов, несъемных мостов и труднодоступных мест ротовой полости.
- Ирригатор не является заменой обычной зубной щетки при гигиене полости рта!
- Продукт не требует профессиональной подготовки для использования.
- Используйте продукт только в соответствии с инструкцией. Любое другое использование считается некорректным.
- Дефекты, возникающие из-за неправильного обращения или повреждения, исключены из гарантии. Это положение также относится к естественному износу.



### Техника безопасности

- **ВНИМАНИЕ!** Держите упаковочный материал вдали от детей и животных. Есть опасность травм и нанесения вреда!
- Ирригатор не подходит для людей, имеющих тяжелые формы пародонтита, раны и язвы слизистой оболочки полости рта. Посетите, пожалуйста, врача, не занимайтесь самолечением, есть опасность инфицирования вследствие попадания бактерий с потоком воды в открытые раны и язвы.
- Держите прибор вдали от источников тепла, таких как плиты, печи, камины или горящие свечи.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.

### Комплектация ирригатора

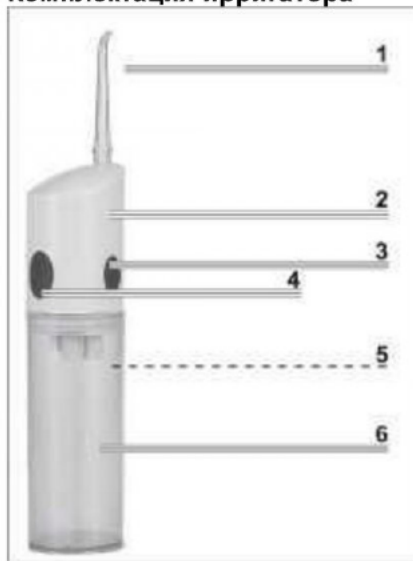

- 1 Насадка
- 2 Корпус насоса
- 3 USB-порт для зарядки
- 4 Кнопка «Вкл./Выкл.»
- 5 Всасывающий шланг
- 6 Резервуар для воды

### Советы

- Из соображений гигиены мы рекомендуем использование ирригатора только одним человеком.
- Во время использования Ваш открытый рот должен располагаться непосредственно над раковиной, в целях незамедлительного удаления воды с остатками пищи.
- Вы можете использовать ирригатор вместе с ополаскивателем для полости рта. Убедитесь, что он имеет

### Подготовка к использованию

1. Почистите зубы зубной щеткой (обычной или : электрической), при необходимости используйте нить.
2. Откройте резервуар ирригатора для воды: для поверните его против часовой стрелки.
3. Достаньте насадку и установите ее в верхней ирригатора.
4. Заполните резервуар теплой водой или ополаскивателем для полости рта.
5. Закройте резервуар, повернув его по часовой стрелке.

### Использование

1. Держа ирригатор в вертикальном положении, насадку непосредственно в пространство между зубами, под брекеты или несъемный мост.
2. Для включения устройства и вывода его из «Р» нажмите и удерживайте три секунды кнопку «Вкл./Выкл.»
3. Медленно и тщательно обрабатывайте зубы с другим. Повторите процесс очистки с внутренней стороны.
4. Для выключения ирригатора нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» один раз.
5. Для перевода устройства в «Режим Сна» нажмите и удерживайте три секунды кнопку «Вкл./Выкл.» «Сна» нужен, чтобы ирригатор случайно не включился, когда Вы перевозите его в сумке.

### Уход и хранение



### ВНИМАНИЕ!

При чистке не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства!

- Снимите резервуар для воды и вылейте всю воду.
- Включите ирригатор на несколько секунд для удаления остатков воды из всасывающего шланга и насадки.
- Если Вы использовали ирригатор с ополаскивателем промойте его теплой водой.
- Перед сборкой дайте изделию полностью высохнуть, затем соберите его.
- Храните ирригатор в сухом месте, недоступном для детей и животных. Не подвергайте прибор воздействию солнечных лучей.

### Характеристики

Модель: RKM-1701  
Объем резервуара: 150 мл  
Давление воды: 60-80 psi  
Литиевая батарея: 560 mAh  
Порт для зарядки: через USB-кабель  
Материал: PC+ABS  
Автовключение: 30 секунд

### Утилизация



Упаковочный материал подлежит вторичной утилизации. Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом, сделайте ее доступной для переработки.

такую же вязкость, как вода – иначе ополаскиватель не сможет поступать через насос. Не используйте таблетки, которые растворяются в резервуаре, гели и кремы!

- Мы рекомендуем снять насадку и поместить ее в резервуар для воды, если Вы хотите взять изделие в поездку. Это позволит предотвратить от повреждений насадку.

изделие экологически безопасным способом дополнительной информации свяжитесь администрацией в Вашей стране.