



Усилители Behringer EP-2000

Мощность при 2 ом/канал: 650 Ватт. Купить за 17 517 руб.

musik-proc


WICA™



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ ВЕСЫ

PS3001

Руководство пользователя

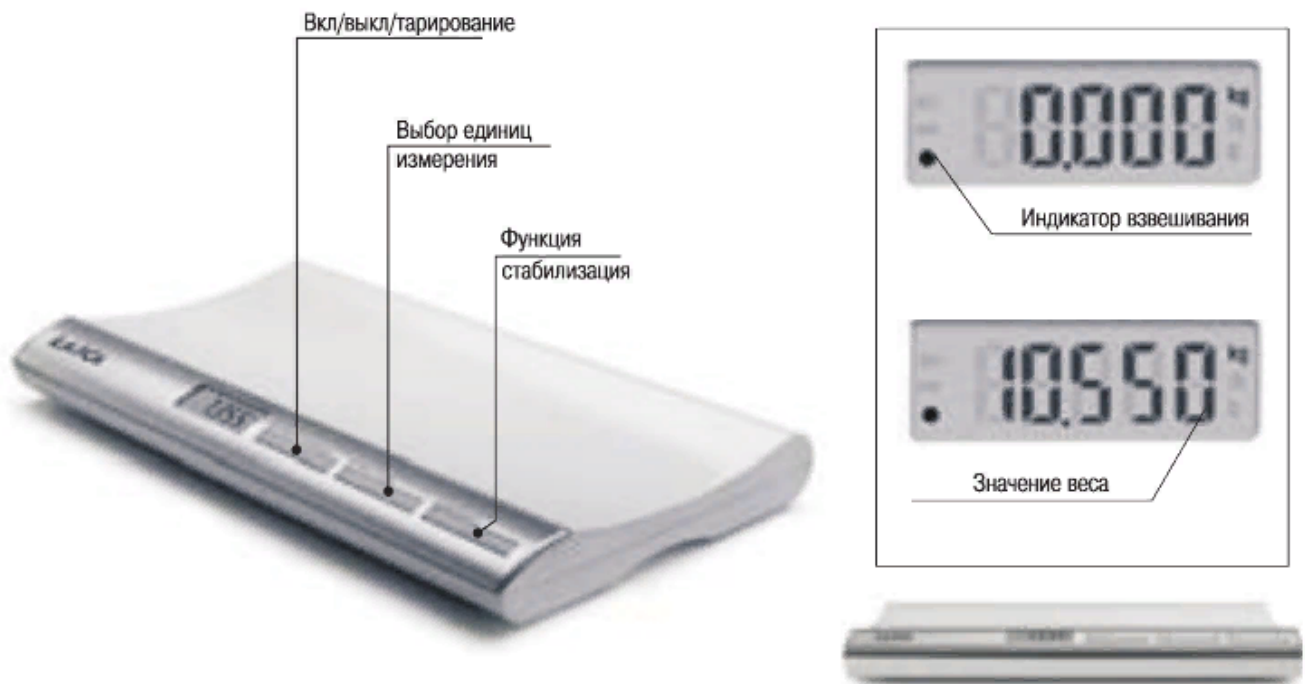

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ ВЕСЫ

Электронные детские весы LAICA, модель PS3001.

Содержание

1. Введение
2. Комплектность
3. Описание
4. Меры безопасности
5. Подготовка к работе
6. Эксплуатация
7. Технические характеристики
8. Гарантийные обязательства

1. Введение

Поздравляем Вас! Вы приобрели современное устройство — электронные детские весы LAICA, Италия (модель PS3001), в дальнейшем тексте «Весы». Для обеспечения длительной и безопасной работы весов крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации. Производитель не несет ответственности за работу весов при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве. Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования весов.

2. Комплектность

- Весы 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.

3. Описание

Весы предназначены для контроля веса ребенка в возрасте от 0 до 24 месяцев. Максимальный вес измерения 20 кг
Дискретность измерения 5 г
Функция «Тарирование» предназначена для автоматического исключения веса пеленки при взвешивании.
Функция «Стабилизация» определяет точный вес ребенка, когда он лежит неспокойно.
3.1. Назначение функциональных клавиш:
• «ВКЛ./ВЫКЛ./ТАРИРОВАНИЕ» кнопка включения и выключения весов / включения функции «Тарирование»;
• «КГ/ФУНТ/УНЦИЯ» кнопка выбора единиц измерения веса (килограммы, фунты и унции).
• «СТАБИЛИЗАЦИЯ» кнопка включения функции «Стабилизация».

4. Меры безопасности

4.1. Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием весов! На устройства, эксплуатация которых происходила с нарушением мер предосторожности,

гарантия не распространяется.

- 4.2. Весы являются прибором, требующим аккуратного обращения для обеспечения точности измерений.
- 4.3. Не оставляйте ребенка без присмотра во время взвешивания!
- 4.4. Не подвергайте весы режим температурным изменениям, избегайте попадания на них влаги, пыли и прямых солнечных лучей.
- 4.5. Не используйте и не храните весы вблизи источников тепла (радиаторы, кухонные плиты, и т.п.).
- 4.6. Протирайте платформу весов слегка влажной тряпкой, а нижнюю часть — сухой тряпкой или салфеткой. Не используйте при чистке весов химические средства.
- 4.7. Устанавливайте весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность, в противном случае показания могут быть неточными или неправильными.
- 4.8. Устанавливайте батарейки в строгом соответствии с указанной полярностью! Не используйте одновременно новые и старые батарейки!

5. Подготовка к работе

- 5.1. Снимите крышку отсека для батареек на нижней части весов.
- 5.2. Вставьте новые батарейки согласно указанной полярности.
- 5.3. Закройте крышку отсека для батареек.
- 5.4. Установите весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность. Если установить весы на мягкую и шероховатую поверхность (например, ковер, линолеум и т.п.), измерения могут быть неправильными.
- 5.5. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./ТАРИРОВАНИЕ» для включения весов. На дисплее отобразится нулевое значение веса:
 - 0,000 kg – измерение веса в килограммах;
 - 0,00 lb – измерение веса в фунтах;
 - 0,0 oz – измерение веса в унциях.
 По умолчанию установленной единицей является кг. Для изменения единицы измерения используйте кнопку «КГ/ФУНТ/УНЦИЯ».
- 5.6. Если весы не работают, проверьте правильность установки батареек.
Внимание: Для работы весов используются батарейки 4 шт. типа AAA 1,5В.

6. Эксплуатация

- 6.1. Выбор единиц измерения
 - 6.1.1. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./ТАРИРОВАНИЕ» на весах, чтобы включить их.
 - 6.1.2. Перед тем, как положить ребенка на весы, выберите необходимую единицу измерения путем нажатия кнопки «КГ/ФУНТ/УНЦИЯ».
- 6.2. Измерение веса с функцией «Стабилизация»
 - 6.2.1. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ./ТАРИРОВАНИЕ», чтобы включить весы. Весы готовы к использованию, когда на дисплее отобразится нулевое значение веса.
 - 6.2.2. Положите ребенка на весы. Если ребенок двигается, то показания весов могут меняться. Для получения точных данных нажмите кнопку «СТАБИЛИЗАЦИЯ». На дисплее замигает символ «•», что означает автоматическое вычисление веса ребенка

