

beurer FWM 45



(D) Fußwärmer Gebrauchsanweisung	2	(I) Scaldapiedi Istruzioni per l'uso	23
(GB) Foot warmer Instructions for use	8	(TR) Ayak ısıtıcısı Kullanma Talimatı	28
(F) Chauffe-pieds Mode d'emploi	13	(RUS) Грелка для ног Инструкция по применению....	33
(E) Calientapiés Instrucciones de uso	18	(PL) But rozgrzewający Instrukcja obsługi	39

Оглавление

1. Комплект поставки.....	34	5. Очистка и уход.....	37
1.1 Описание прибора.....	34	6. Хранение.....	37
2. Важные указания.....	34	7. Утилизация.....	38
3. Использование по назначению.....	36	8. Что делать при возникновении каких-либо проблем?.....	38
4. Обслуживание.....	36	9. Технические характеристики.....	38
4.1 Подготовка к работе.....	36	10. Гарантия.....	38
4.2 Включение.....	36		
4.3 Выключение.....	36		
4.4 Ступени массажа/уровни обогрева.....	36		

Пояснения к символам


	Прочтите инструкции!		Не стирайте
			Не отбеливайте
	Не втыкайте иголки в прибор!		Не сушите в сушилке
			Не гладьте утюгом
	Применяйте только в сухих помещениях		Химчистка запрещена
IPX1	Защищено от проникновения капель воды		Запрещается использовать для маленьких детей (до 3-х лет).
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.		
	ВНИМАНИЕ указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.		
	УКАЗАНИЕ; Указание на важную информацию		

1. Комплект поставки

- 1 грелка для ног с ворсистой подкладкой
- 1 блок питания
- 1 инструкция по эксплуатации

1.1 Описание прибора

- 1. Провод
- 2. Блок питания
- 3. Выключатель
- 4. Ползунковый переключатель ступени массажа (0–1–2)
- 5. Ползунковый переключатель уровня обогрева (0–1–2)
- 6. Ворсовая подкладка
- 7. Грелка для ног

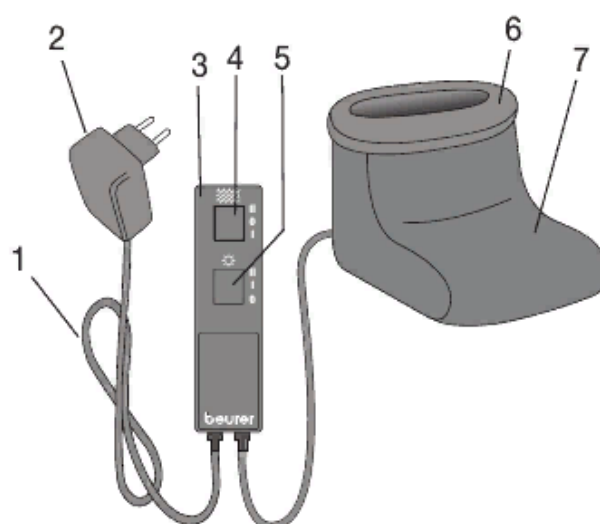

2. Важные указания

Сохраните для последующего использования!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмам (поражение электрическим током, ожог кожи, пожар и пр.). Следующие указания по технике безопасности и предупреждения об опасностях служат не только для охраны Вашего здоровья или здоровья окружающих, но и для защиты изделия. Поэтому обязательно соблюдайте эти указания и при передаче прибора другому человеку передавайте инструкцию вместе с ним.
- Данную грелку для ног запрещается использовать для людей, нечувствительных к высоким температурам, и других лиц, нуждающихся в защите и присмотре, так как они не могут реагировать на перегрев (например, диабетиков, лиц с изменениями кожи, вызванными заболеваниями, или с зарубцевавшимися участками кожи в области применения, после приема болеутоляющих средств или алкоголя).
- Запрещается использовать грелку для ног для маленьких детей (до 3-х лет), так как они не могут реагировать на перегрев.
- Данную грелку для ног запрещается использовать детям (в возрасте 3–8 лет), за исключением тех случаев, когда переключатель предварительно настроен родителями или другими взрослыми, несущими ответственность за ребенка, а также если ребенок был обучен безопасному использованию грелки для ног.
- Допускается использование грелки для ног детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными

или умственными способностями, если они находятся под присмотром или обучены безопасному применению грелки для ног и предупреждены о возможных опасностях.

- Не позволяйте детям играть с грелкой для ног.
- Очистку и техническое обслуживание детям разрешается выполнять только под присмотром взрослых.
- Данная грелка для ног не предназначена для использования в больницах.
- Запрещается использовать данную грелку для ног для обогрева животных.
- При использовании грелки для ног необходимо снять обувь.
- Не втыкайте в грелку иголки.
- Используйте грелку только в сухих помещениях.
- Используйте только прилагающийся оригинальный блок питания. Тип: KL-AD3060VA.
- Электрические и магнитные поля, излучаемые этой грелкой для ног, при определенных обстоятельствах могут нарушить работоспособность Вашего кардиостимулятора. Однако интенсивность этого излучения намного ниже предельно допустимых значений: напряженность электрического поля — не более 5000 В/м, напряженность магнитного поля — не более 80 А/м, магнитная индукция — не более 0,1 мТл. Поэтому перед применением грелки для ног проконсультируйтесь со своим врачом и производителем кардиостимулятора.
- Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте провода.
- Необходимо постоянно проверять, нет ли на грелке для ног следов износа или повреждений.
Если на грелке для ног имеются такие следы или она использовалась не по назначению, перед очередным применением она должна быть проверена специалистом.
- Если провод сетевого питания грелки для ног поврежден, то во избежание опасности он подлежит замене в сервисной службе или другим компетентным специалистом. Сам провод и работа по его замене платные услуги.
- Обязательно следуйте указаниям по применению (глава 4), очистке и уходу (глава 5) и хранению (глава 6).
- С дополнительными вопросами по применению приборов Beurer обращайтесь в нашу сервисную службу.

