

Pflege

Verwenden Sie nur Wasser oder Neutrale Reinigungsmittel zum reinigen des Geräts. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (Z. B. -, Essig- oder Kesselstein-Entferner), da solche Mittel können das Gerät beschädigen. Nicht waschen Sie, mit heißem Wasser von über 40 °C. Halten Sie das Gerät fern von Hochtemperatur-Bereich und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn Sie eine Mundspülung verwendet wird, sollte seine Überreste entleert und gereinigt das Gerät werden. Um dies zu tun, füllen Sie den Tank mit gefiltertes Wasser und führen Sie Wasser durch die verwendet Düse.

Desinfektionseinheit. Füllen Sie den Tank mit 200-300 ml 40% Alkohol und führen Sie es durch eine Düse verwendet. Eine Stunde nach dem Verfahren, es ist notwendig, durch die Vorrichtung gefilterten Wassers zum Reinigen von Restalkohol zu fahren.

Hauptgerät 1. Entfernen Sie den Wassertank und entleeren Sie das Wasser Weg vom Hauptgerät. 2. Reinigen Sie mit einem weichen feuchten Tuch. 3. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht im Wasser zu reinigen. **Griff 1.** Waschen mit Wasser und trocknen mit einem weichen Tuch. 2. Nicht biegen, ziehen und drehen den Wasser Rohr. **Wassertank 1.** Waschen mit Wasser und wischen mit einem weichen, trockenen Tuch. 2. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank ist invertiert und fest zu speichern. **Düsen 1.** Waschen mit Wasser und wischen mit einem weichen, trockenen Tuch. 2. Setzen Sie die Düse in die Düsen-Speicher. **Adapter:** Wischen das Metall Teil der Netzstecker mit einem trockenen Tuch einmal alle 6 Monate.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Ent-sorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altge-räte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

TECHNISCHE DATEN: Adapter: Eingang: 100-240V,50/60Hz, 0,8A, Ausgang: 12V === 1500 mA
Max. Wasser-druck: 790 kPa

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Motor läuft nicht	Stellen Sie sicher, dass der adapter fest verbindet die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und das Gerät eingeschaltet ist
Wasserdruck ist sehr gering	Schmutz stecken in der Düse	Reinigen oder ersetzen durch eine neue Düse
	Die Düse ist verformt	Ersetzen durch eine neue Düse
Wasser kommt nicht heraus	Schmutz stecken in den tank Ventil	Reinigen Sie das Ventil und füllen den Wassertank mit klarem Wasser
	Der Wassertank ist leer	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser
Wasser tank fließt	Wasserdruck unter der niedrigsten Einstellung	Schieben Sie den Schalter, um den Druck einstellen
	Tank Ventil nicht geöffnet	Drücken Sie den Wassertank, oder legen Sie das Ventil korrekt
Wasser tank fließt	Das Ventil ist verloren	Ersetzen durch eine neue Ventil
	Das Ventil ist nicht installiert werden	Installieren Sie das Ventil korrekt
Zahnfleischtaschen-reinigung Düse Spitze ist gerissen	Düse Spitze ist getragen	Ersetzen durch eine neue Düse

Bitte beachten Sie: Der Hersteller lässt sich das Recht Änderungen an der Design, Lieferumfang und Farbe vornehmen.

SPEICHERN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

РУССКИЙ

ВАЖНО

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием данного прибора. Инструкция по технике безопасности, представленная здесь, поможет вам использовать данный прибор правильно, а также предотвратить несчастные случаи. Во время эксплуатации прибора соблюдайте основные меры безопасности, особенно если в доме есть дети.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым подключением прибора в сеть проверьте, соответствует ли электропитание, указанное на технической этикетке на приборе, электропитанию в Вашей сети.

- Если вы уронили прибор и на нем появились видимые повреждения, не пользуйтесь прибором. Отнесите его в сервисный центр для проверки.
- Не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным сетевым шнуром/вилкой/сетевой розеткой.
- Не позволяйте детям играть или пользоваться прибором. Пожалуйста, храните прибор в недоступном для детей месте.
- Всегда отключайте прибор после использования.
- Не касайтесь вилки мокрыми руками.
- Не погружайте прибор / сетевой шнур / вилку в воду или другие жидкости.
- Не размещайте прибор там, где он может упасть в воду.
- Не пользуйтесь прибором во время купания.
- Не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Немедленно отключите прибор от сети. Не пользуйтесь прибором. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и выше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний только под надзором.
- Прибор должен использоваться только с оригинальным сетевым адаптером.
- Держите прибор вдали от горячих поверхностей.
- Прибор должен использоваться только с оригинальными насадками.
- Пожалуйста, не используйте прибор, если вы потеряли насадку.
- Храните насадки в недоступном для детей месте. Насадка достаточно мала и существует риск проглатывания.
- Не направляйте струю под язык, в ухо, нос или другие чувствительные области.
- Не используйте прибор: если в полости рта имеются раны; если Вы носите какие-либо предметы, украшения на губах, зубах, во рту. Предварительно удалите их перед использованием прибора.
- Людям с зубной болью или с чувствительными деснами следует проконсультироваться со своим стоматологом перед использованием прибора.
- Используйте прибор только для чистки полости рта.
- Некоторые виды жидкостей для полоскания рта могут привести к повреждению прибора, трещинам резервуара. Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком или вязкой, иначе прибор засорится. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40°C. Это может привести к ожогам слизистой.
- Наполняйте резервуар отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит примесь солей, известки, песка и т.д., которые быстро засорят прибор и насадки. Прибор, попавший в сервисный центр с засорами из-за грязной воды или ополаскивателей автоматически снимается с гарантии из-за нарушения правил эксплуатации.
- Не используйте абразивные и химические очистители, полироль для очистки прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно! При обнаружении вскрытия прибора гарантия на прибор автоматически аннулируется. Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

- Не используйте прибор: если в полости рта имеются раны; если Вы носите какие-либо предметы, украшения на губах, зубах, во рту. Предварительно удалите их перед использованием прибора.

- Людям с зубной болью или с чувствительными деснами следует проконсультироваться со своим стоматологом перед использованием прибора.

- Некоторые виды жидкостей для полоскания рта могут привести к повреждению прибора, трещинам резервуара. Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.


- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком или вязкой, иначе прибор засорится. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40°C. Это может привести к ожогам слизистой.

- Наполняйте резервуар отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит примесь солей, известки, песка и т.д., которые быстро засорят прибор и насадки. Прибор, попавший в сервисный центр с засорами из-за грязной воды или ополаскивателей автоматически снимается с гарантии из-за нарушения правил эксплуатации.

- Не используйте абразивные и химические очистители, полироль для очистки прибора.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно! При обнаружении вскрытия прибора гарантия на прибор автоматически аннулируется. Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

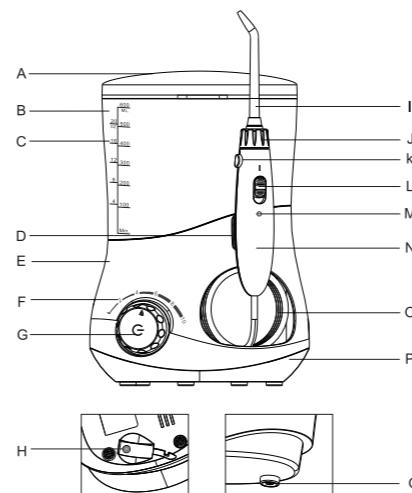

- A: Хранение насадок в крышке
B: Резервуар
C: Уровень воды
D: Держатель рукоятки на магните
E: Прибор
F: Уровни давления
G: Кнопка Вкл/Выкл (Нажатие - для включения / выключения прибора. Поворот - для регулировки давления струи.)
H: гнездо для адаптера
I: Насадка
J: Поворотный механизм насадки
K: Кнопка извлечения насадки
L: Переключатель паузы
M: Маркировка I/O
N: Рукоятка
O: Шланг
P: База прибора
Q: Пробка резервуара

Насадки



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите прибор на ровной, твердой поверхности. Убедитесь, что шнур сухой и не имеет повреждений. Прибор работает от сетевого адаптера с техническими характеристиками: на входе :100-240В~,50/60Гц, 0,8 А; на выходе:12 В ,1500 мА).

1. Вставьте штекер адаптера в разъем нижней части прибора и подключите адаптер к электрической розетке. (Рис.1)

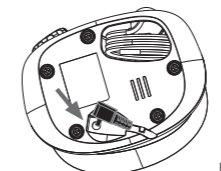


Рис.1

2. Снимите крышку с насадками.
3. Снимите резервуар для воды и заполните чистой фильтрованной водой, температурой не выше 40 ° C. Не добавляйте в воду соль, зубную пасту или химические растворы. Рис.2-1

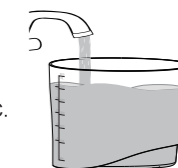


Рис.2-1

4. Установите резервуар на корпус прибора. Слегка надавите на резервуар для более плотной посадки. Рис.2-2

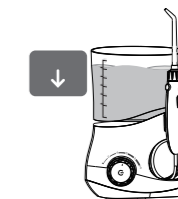


Рис.2-2

Установка и снятие насадки

Поместите насадку в отверстие на рукоятке прибора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к рукоятке. Будет слышен характерный щелчок, если насадка правильно установлена. Рис.3

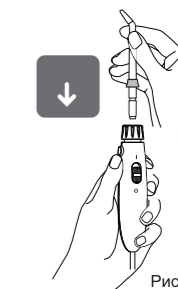


Рис.3



Потянуть вверх

Нажать

Рис.4

Для извлечения насадки нажмите на кнопку извлечения насадки и потяните насадку вверх. (Рис.4)

Эксплуатация

Примечание: Не включайте прибор до размещения насадки во рту. При первом использовании, рекомендуем выбрать низкое давление, постепенно повышая его до нужного уровня.

1. Возьмитесь за рукоятку и направьте насадку в раковину, затем нажмите на кнопку Вкл/Выкл, для включения прибора. (Рис.6)
2. Поворачивайте кнопку Вкл /Выкл для регулировки давление воды. Переведите переключатель паузы в положение "I" для начала орошения. Для приостановки подачи воды, переведите переключатель паузы в положение "0". (Рис.7-1 и 7-2)

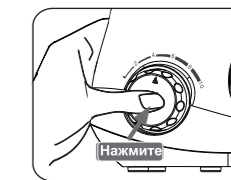


Рис.6

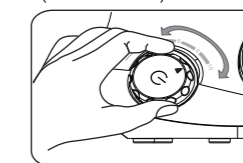


Рис.7-1

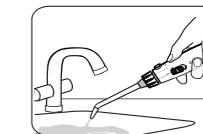


Рис.7-2